

КАТАЛОГ. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕСТНЫЕ ВАННЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ, НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРГАНОВ ТАЗА.

1. ВВЕДЕНИЕ. ФОТО. ЧЕРТЕЖИ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.



ФУНКЦИИ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.			
	E-15 S	E-15 S AIR	P-15 S	P-15 S AIR
РАЗМЕРЫ В УСТАНОВЛЕННОМ ВИДЕ	97CM (Д) X 94CM (Ш) X 114CM (В)	97CM (Д) X 94CM (Ш) X 114CM (В)	86CM(Д) X 86CM (Ш) X 76CM (В)	86CM(Д) X 86CM (Ш) X 76CM (В)
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ	104CM (Д) X 104CM (Ш) X 132CM(В)	104CM (Д) X 104CM (Ш) X 132CM(В)	102CM (Д) X 97CM (Ш) X 89CM (В)	102CM (Д) X 97CM (Ш) X 89CM (В)
ОБЪЕМ ВОДЫ	57Л.	57Л.	57Л.	57Л.
КОРПУСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	АКРИЛ, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	АКРИЛ, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	АКРИЛ, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	АКРИЛ, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НОЖКИ	4PCS	4PCS	4PCS	4PCS
ВОДНАЯ ПОМПА I.I.C 220V/50HZ	+	+	+	+
ВОЗДУШНАЯ ПОМПА ДЛЯ ПОДВОДИМО ВОЗДУШНОГО ЖЕЛЧУЖНОГО МАССАЖА С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА I.I.C 220-60	N/A	10PCS AIR JETS .50 AIR CHANNELS TOTAL.	N/A	10PCS AIR JETS .50 AIR CHANNELS TOTAL.
ВЕНТУРИ ДАТЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО МАССАЖА ВОДА/ВОЗДУХ	6	6	6	6
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ ВОЗДУХОМ	2	2	2	2
TUB TO WATER SUPPLY САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОМ.	1/2" ШЛАНГ ВЫС. ДАВЛЕНИЯ HOT/COLD	1/2" ШЛАНГ ВЫС. ДАВЛЕНИЯ HOT/COLD	1/2" ШЛАНГ ВЫС. ДАВЛЕНИЯ HOT/COLD	1/2" ШЛАНГ ВЫС. ДАВЛЕНИЯ HOT/COLD
СЛИВ В ВАННУ.	ХРОМИР. РУЧН.	ХРОМИР. РУЧН.	ХРОМИР. РУЧН.	ХРОМИР. РУЧН.
СЛИВ В ПОЛУ.	2" (50MM.) РЕКОМЕНДОВАН РАЗРЫВ СТРУИ	2" (50MM.) РЕКОМЕНДОВАН РАЗРЫВ СТРУИ	2" (50MM.) РЕКОМЕНДОВАН РАЗРЫВ СТРУИ	2" (50MM.) РЕКОМЕНДОВАН РАЗРЫВ СТРУИ
СИСТЕМА НАЛИВА ВАННЫ	ЛАТУНЬ, ХРОМ	ЛАТУНЬ, ХРОМ	ЛАТУНЬ, ХРОМ	ЛАТУНЬ, ХРОМ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	ПНЕВМАТ.	ПНЕВМАТ.	ПНЕВМАТ.	ПНЕВМАТ.
СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ	РУЧН.	РУЧН.	РУЧН.	РУЧН.

ПРАЙС-ЛИСТ. МЕСТНЫЕ ВАННЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

№	МОДЕЛЬ
1	Е-15S ВАННА ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. ГИДРОМАССАЖ, ВЕНТУРНЫЙ МАССАЖ.
2	Е-15S AIR ВАННА ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. ВОЗДУШНЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ МАССАЖ.
3	Р-15S ВАННА ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. ГИДРОМАССАЖ, ВЕНТУРНЫЙ МАССАЖ.
4	Р-15S AIR ВАННА ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. ВОЗДУШНЫЙ ПУЗЫРЬКОВЫЙ ЖЕМЧУЖНЫЙ МАССАЖ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.	
1	R-120 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ ВАННЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ. (ВСЕ МОДЕЛИ)
2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ. (ВСЕ МОДЕЛИ)
3	УТОПЛЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ С ЗАПОРНЫМ КРАНОМ/СМЕШАННАЯ ВОДА. (ВСЕ МОДЕЛИ)
4.	CD-OZ ОЗОНОГЕНАТОР И ОЗОНОВЫЙ ДЖЕТ, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ГИДРОМАССАЖНУЮ СИСТЕМУ ВАННЫ. СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ И САНИРОВАНИЯ ВОДЫ И ВСЕХ СИСТЕМ ВАННЫ. МОДЕЛИ Е-15S, Р-15S

МЕСТНЫЕ ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ

**ЭТО ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НЕ НА ВСЕ ТЕЛО,
А НА ЛИШЬ НА ОПРЕДЕЛЁННУЮ ОБЛАСТЬ (ЕГО ЧАСТЬ.)**

ЭТИ ВАННЫ ПРОВОДЯТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- ТЕПЛОЙ ВОДЫ (36-38°C)
- ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (39-42°C)
- ХОЛОДНЫЕ (10-15°C).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

- ТЕПЛЫХ/ГОРЯЧИХ ЛЕЧЕБНЫХ ВАНН 10-30 МИН,
- ХОЛОДНЫХ ВАНН 3-6 МИН. НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ НАЗНАЧАЮТ 15-30 ПРОЦЕДУР.
- ПОСЛЕ ПРОХЛАДНЫХ И ХОЛОДНЫХ НОЖНЫХ ВАНН ПОКАЗАНО ЭНЕРГИЧНОЕ РАСТИРАНИЕ СТОП И ГОЛЕНЕЙ.

СИДЯЧИЕ ВАННЫ ПРОВОДЯТ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ВАННАХ (СМ. КАТАЛОГ).

БОЛЬНОЙ САДИТСЯ В ВАННУ. ПРИ ЭТОМ В ВОДУ ПОГРУЖАЮТСЯ ТАЗ, ЖИВОТ И ЧАСТЬ БЕДЕР.

ЧАСТЬ ТЕЛА, НАХОДЯЩУЮСЯ ВНЕ ВАННЫ, УКУТЫВАЮТ ПРОСТЫНЕЙ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, И ОДЕЯЛОМ.


СИДЯЧИЕ ВАННЫ МОГУТ БЫТЬ:

- ТЕПЛЫЕ (37-38°C, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 20-40 МИН),
- ГОРЯЧИЕ (40°C И ВЫШЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 10-20 МИН)
- ХОЛОДНЫЕ СИДЯЧИЕ ВАННЫ (15-20°C, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3-6 МИН);
- ХОЛОДНЫЕ СИДЯЧИЕ ВАННЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ В ПОЧКАХ И ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА.

2.

Р-22 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АНАТОМИЧНЫЕ МЕСТНЫЕ ВАННЫ ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА, ВОСХОДЯЩИЕ ДУШИ ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.

ПРИМЕЧАНИЕ: НА НЕКОТОРЫХ ФОТО ПРИБОРЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ.

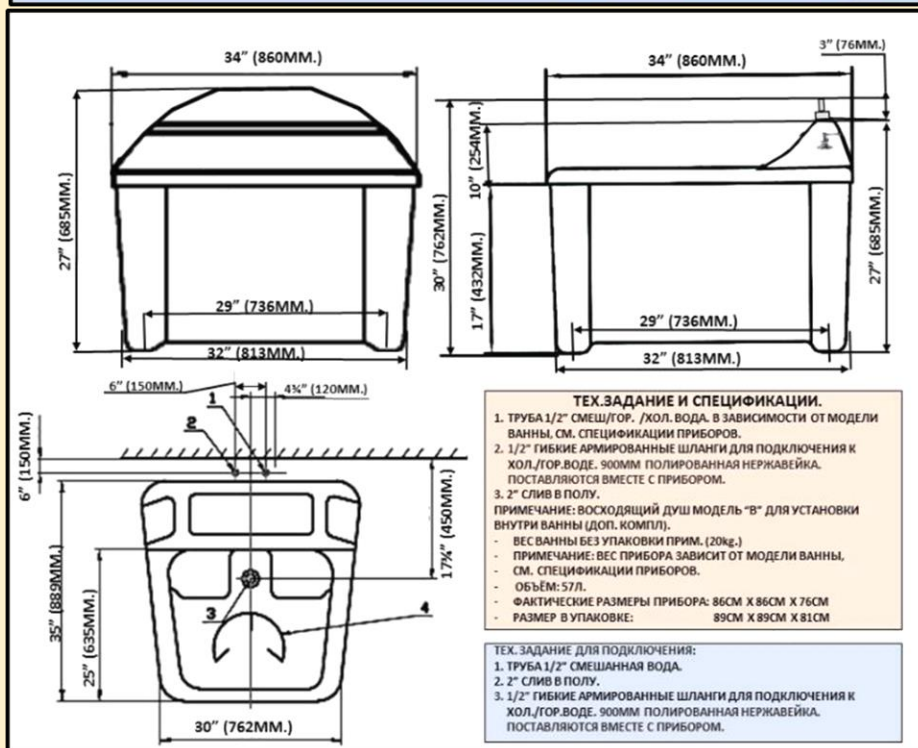

**МОДЕЛЬ "BASIC"
С ДОП. РУЧКАМИ**




МОДЕЛЬ "BASIC" С ДОП. РУЧКАМИ



**МОДЕЛЬ "А" С ДОП. РУЧНЫМ
ДУШЕМ И ВОСХ. ДУШЕМ.**



**МОДЕЛЬ "А" С ДОП. РУЧНЫМ
ДУШЕМ И ВОСХ. ДУШЕМ.**

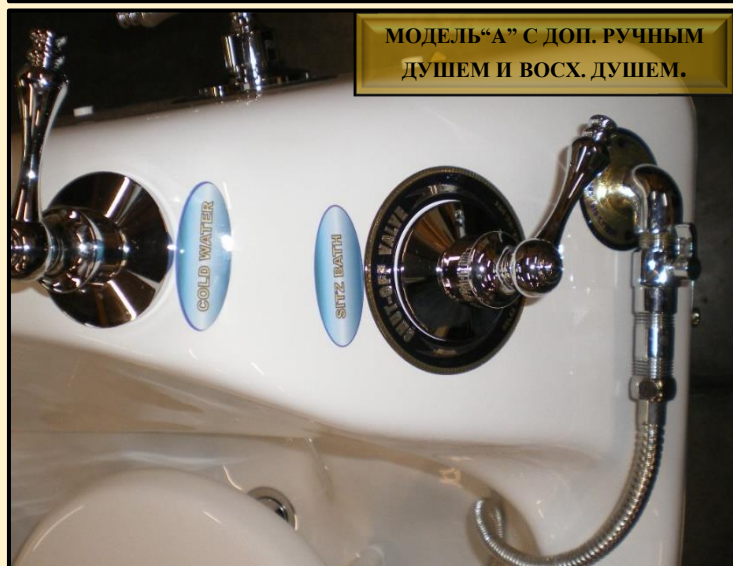

**МОДЕЛЬ "А" С ДОП. РУЧНЫМ
ДУШЕМ И ВОСХ. ДУШЕМ.**



МОДЕЛЬ "В" С ДОП. ВОСХОДЯЩИМ ДУШЕМ

MODEL "B"



MODEL "B"



MODEL "B"



MODEL "B"



ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА МОДЕЛЬ "В". ОСНАЩЕНА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ. ВАННА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ТРУБАМ ХОЛ. И ГОР. ВОДЫ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

ПРИМ. 1: МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЗАВИСИМО, ЛИБО СОЧЕТАНО С ВОСХОДЯЩИМ ДУШЕМ.

ПРИМ. 2: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОСХОДЯЩЕГО ДУША И НЕЗАВИСИМЫЙ КРАН УПРАВЛЕНИЯ ВОСХОДЯЩИМ ДУШЕМ (ДОП. КОМПЛ.)

1. ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АНАТОМИЧНЫЙ КОРПУС ИЗ ОСОБОПРОЧНОГО АКРИЛА ВЫСОКОЙ ПОЛИРОВКИ.
2. ХРОМИРОВАННАЯ СИСТЕМА СЛИВА ВОДЫ.
3. СПЕЦ. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КРУГЛЫЙ КРАН НАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ, ЛАТУНЬ, ХРОМ.
4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ X-120
5. КРАН УПРАВЛЕНИЯ СМЕШАННОЙ ВОДОЙ.
6. РАЗМЕР ПРИБОРА: 86СМ X 86СМ X 76 СМ;
7. ПРИМ. ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ: 25КГ.;
8. ПРИМ. ВЕС В УПАКОВКЕ: 45КГ.

ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. СПЕЦ. ПОРУЧНИ (СМ. ФОТО).
2. ДУШ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ С КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
3. ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.

ТЕХ. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:


1. ТРУБЫ ½" ХОЛ/ГОР. ВОДА.
2. 2" СЛИВ В ПОЛУ.
3. ½" ГИБКИЕ АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ХОЛ/ГОР. ВОДЕ 900ММ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА. ПОСТАВЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С ПРИБОРОМ.

2.1

Р-22 СИДЯЧАЯ ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА. ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА. СПЕЦИФИКАЦИЯ.

СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В ПРАЙС-ЛИСТЕ.

#	МОДЕЛЬ	Р-22 СИДЯЧАЯ ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА. ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.
1	"BASIC"	СИДЯЧАЯ ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.
2	"BASIC PLUS"	СИДЯЧАЯ ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.
3	"A"	СИДЯЧАЯ ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.
4	"B"	СИДЯЧАЯ ВАННА ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.		
1	МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ВАННЫ	ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.
2	МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ВАННЫ	ХРОМИРОВАННЫЕ ПОРУЧНИ (2PCS.).
3	"A", "B"	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ/ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ В ХРОМИРОВАННОМ КОРПУСЕ.
4	"A", "B"	РУЧНОЙ ДУШ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ С НЕЗАВИСИМЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ "BASIC PLUS".		
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОГУТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО.		
1	"BASIC PLUS"	DR-4-500 VT УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ.
2	"BASIC PLUS"	DR-4-500 VT SH УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АВТОТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ И РУЧНЫМ ДУШЕМ
#	МОДЕЛЬ	ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА.
1	"A"	ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2	"B"	ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИДЯЧЕЙ ВАННОЙ

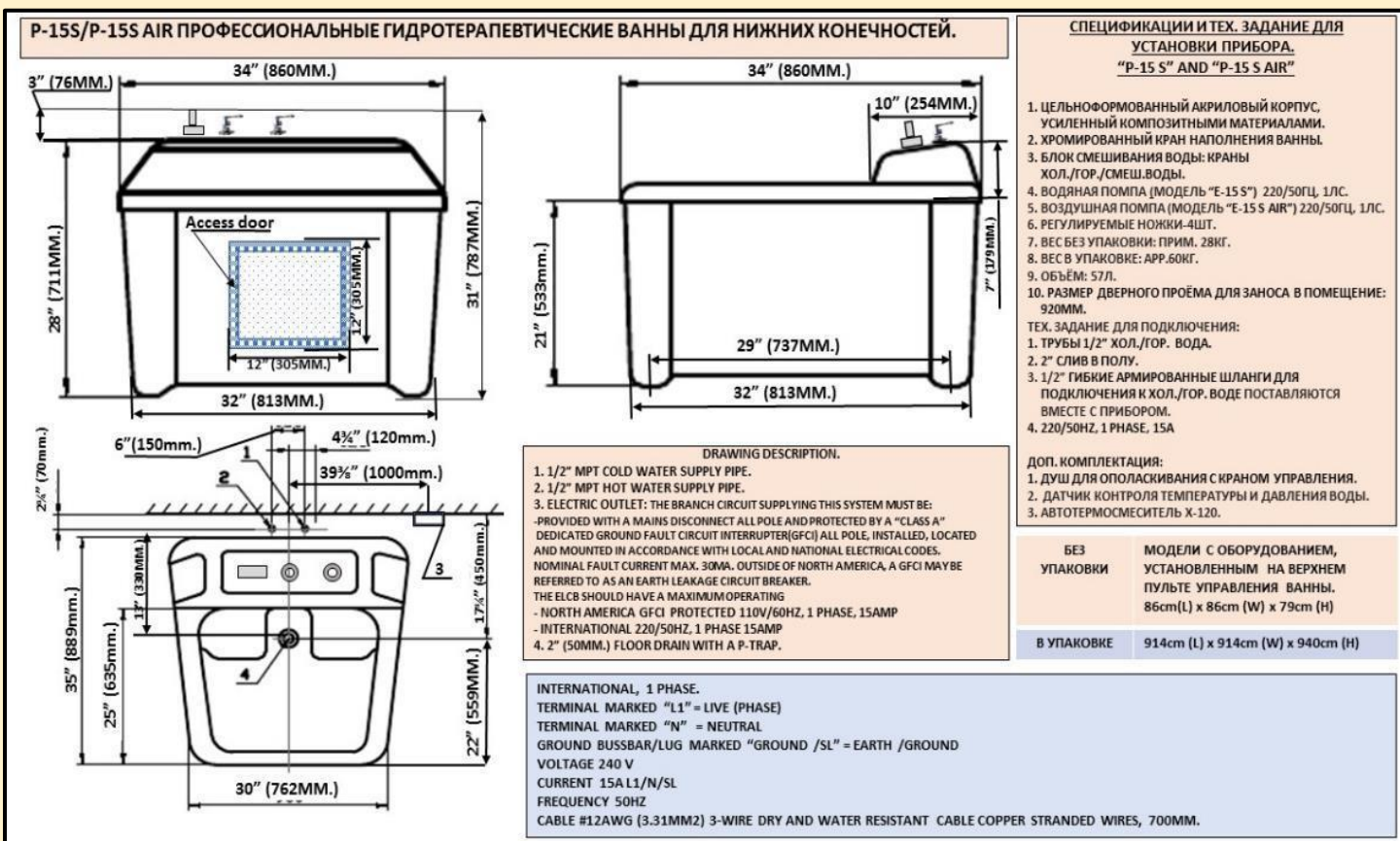

**1. ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ МОДЕЛЬ "А" ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ ВАННЫ
ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА. ВЫСОКАЯ ПОСАДКА.**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОЕ АКРИЛОВОЕ СИДЕНЬЕ;
 - РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.
 - ХРОМИРОВАННЫЙ ДУШЕВОЙ МАССАЖНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ УСТАНОВКИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ.
 - 1/2" ГИБКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДЕ. 900ММ. ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА.
- ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ: (43СМ X 43СМ X 33СМ)
РАЗМЕРЫ В УПАКОВАННОМ ВИДЕ (КАРТОННАЯ КОРОБКА): (43СМ X 43СМ X 36СМ)
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ: 4КГ.
ВЕС В УПАКОВКЕ: 6.8КГ.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ: МАКС. 9,5Л/МИН.

ТЕХ. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. ТРУБА 1/2" СМЕШАННАЯ ВОДА.
2. 2" СЛИВ В ПОЛУ.
3. 1/2" ГИБКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДЕ. 900ММ. ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА. ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С ПРИБОРОМ.



**2. ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ МОДЕЛЬ "В" ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВАННОЙ
ДЛЯ ОРГАНОВ ТАЗА. НИЗКАЯ ПОСАДКА. УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ВО ВНУТРЬ ВАННЫ.**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:


- ЦЕЛЬНОФОРМОВАННОЕ АКРИЛОВОЕ СИДЕНЬЕ;
 - РАМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.
 - ХРОМИРОВАННЫЙ ДУШЕВОЙ МАССАЖНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ УСТАНОВКИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КНОПКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ.
 - 1/2" ГИБКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДЕ. 900ММ. ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА.
- ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ: (43СМ X 43СМ X 25СМ)
РАЗМЕРЫ В УПАКОВАННОМ ВИДЕ (КАРТОННАЯ КОРОБКА): (43СМ X 43СМ X 28СМ)
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ: 4КГ.
ВЕС В УПАКОВКЕ: 6.8КГ.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ: МАКС. 9,5Л/МИН.


ТЕХ. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. ТРУБА 1/2" СМЕШАННАЯ ВОДА.
2. 2" СЛИВ В ПОЛУ.
3. 1/2" ГИБКИЙ АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДЕ. 900ММ. ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА. ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С ПРИБОРОМ.




2.2 ЧЕРТЕЖИ

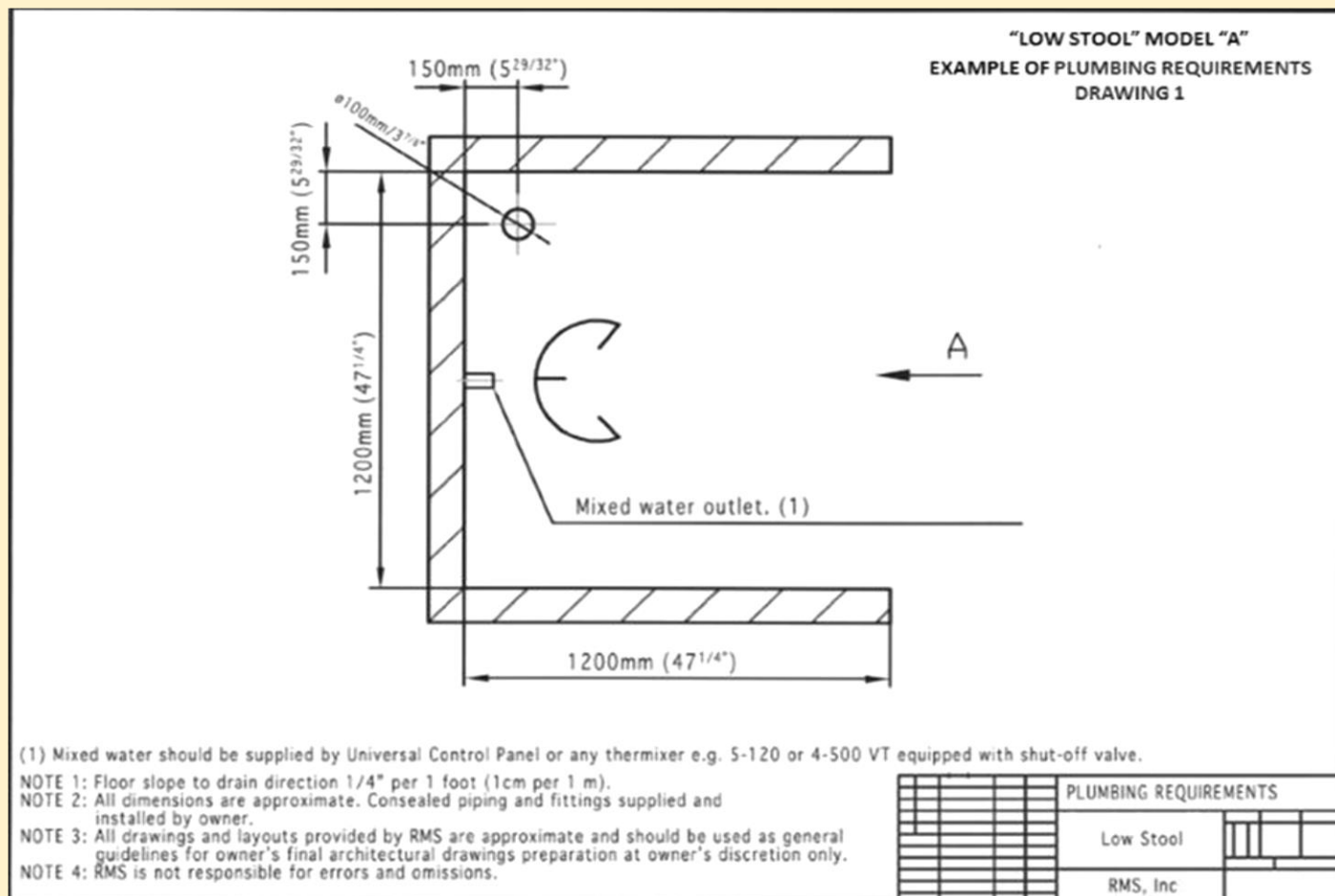

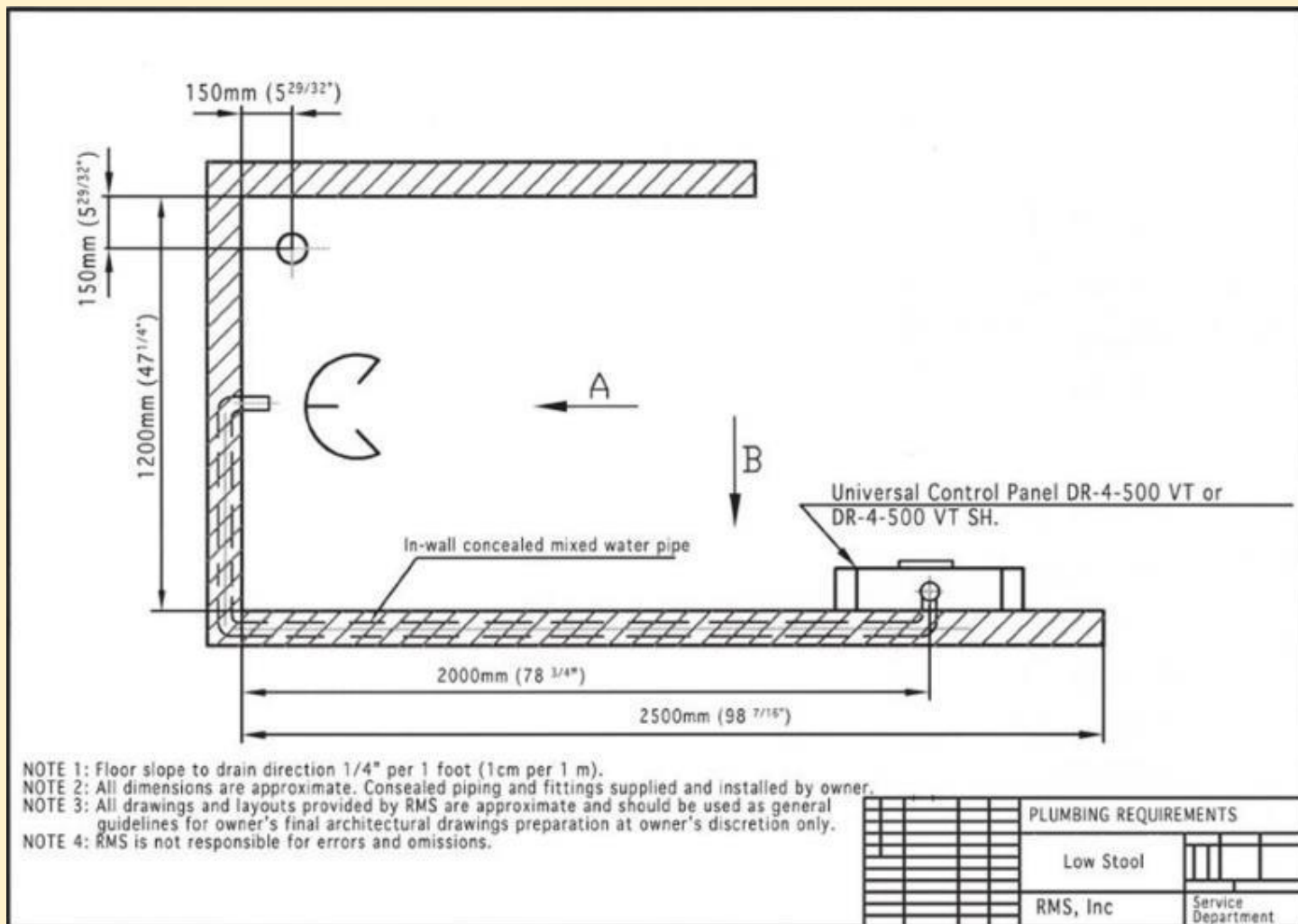

Low Stool

Drawing 3

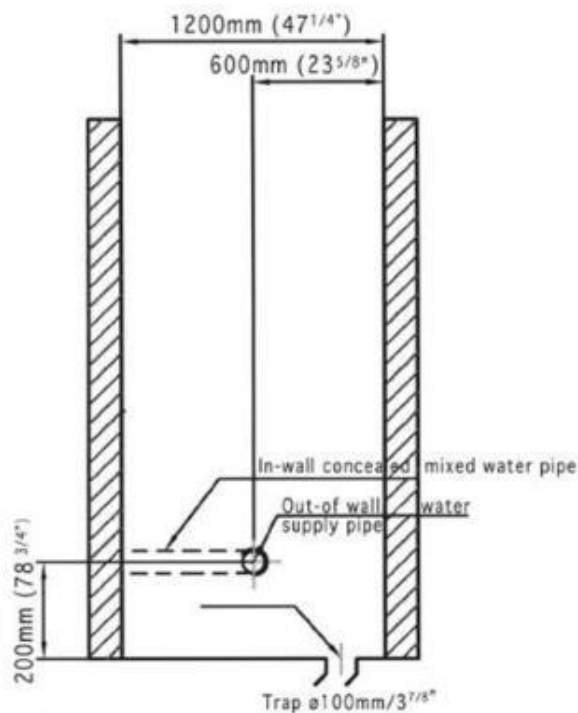

NOTE 1: In-wall mixed water pipe 3/4" from control panel

NOTE 2: Mixed water supply connection: Reducer ø3/4" -1/2" x 1 5/8"

NOTE 3: Floor slope to drain direction 1/4" per 1 foot (1cm per 1 m).

NOTE 4: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.

NOTE 5: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

NOTE 6: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS			
		Low Stool	
		RMS, Inc	

3.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АНАТОМИЧНЫЕ МЕСТНЫЕ ВАННЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: НА НЕКОТОРЫХ ФОТО ПРИБОРЫ МОГУТ БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ.

E-15 S ВАННЫ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. P-15 S ВАННЫ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.



E-15S, E-15S AIR ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВАННЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

БЕЗ УПАКОВКИ	МОДЕЛИ С ОБОРУДОВАНИЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА ВЕРХНЕМ ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ ВАННЫ. 96.5cm (W) x 96.5cm (L) x 114cm (H)
В УПАКОВКЕ	104cm (L) x 104cm (W) x 132cm (H)

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХ. ЗАДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРА, "E-15 S" AND "E-15 S AIR"


1. ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛЫЙ КОРПУС, УСИЛЕННЫЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.
2. ХРОМИРОВАННЫЙ КРАН НАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ.
3. БЛОК СМЕШИВАНИЯ ВОДЫ: КРАНЫ ХОЛ./ГОР./СМЕШ. ВОДЫ.
4. ВОДЯНАЯ ПОМПА (МОДЕЛЬ "E-15 S") 220/50Гц, 1ЛС.
5. ВОЗДУШНАЯ ПОМПА (МОДЕЛЬ "E-15 S AIR") 220/50Гц, 1ЛС.
6. РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ-4ШТ.
4. ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ: ПРИМ. 28кг.
5. ВЕС В УПАКОВКЕ: АРР. 60кг.
6. ОБЪЕМ: 57Л.
7. РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПРОЕМА ДЛЯ ЗАНОСА В ПОМЕЩЕНИЕ: 970мм.

ТЕХ. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. ТРУБЫ 1/2" ХОЛ./ГОР. ВОДА.
2. 2" СЛИВ В ПОЛУ.
3. 1/2" ГИБКИЕ АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ХОЛ./ГОР. ВОДЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С ПРИБОРОМ.
4. 220/50Гц, 1 PHASE, 15A


ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. ДУШ ДЛЯ ОПОЛАСКИВАНИЯ С КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ.
2. ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.

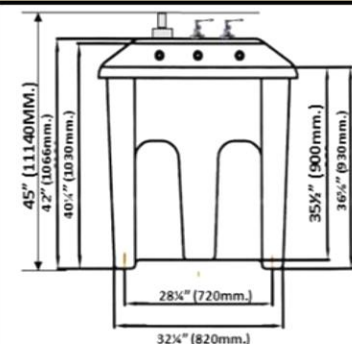

A

C

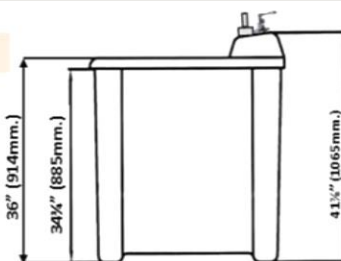


SUPPLY - ONE PHASE NORTH AMERICA, PHASES 1
VOLTAGE 110V
CURRENT 15A
FREQUENCY 60HZ
CABLE #12AWG (3.31MM2) 3-WIRE DRY AND WATER RESISTANT CABLE COPPER STRANDED WIRES, 700MM.

INTERNATIONAL, 1 PHASE.
TERMINAL MARKED "L1" = LIVE (PHASE)
TERMINAL MARKED "N" = NEUTRAL
GROUND BUSSBAR/LUG MARKED "GROUND/SL" = EARTH /GROUND
VOLTAGE 240 V
CURRENT 15A L1/N/SL
FREQUENCY 50HZ
CABLE #12AWG (3.31MM2) 3-WIRE DRY AND WATER RESISTANT CABLE COPPER STRANDED WIRES, 700MM.

DRAWING DESCRIPTION.

1. 1/2" MPT COLD WATER SUPPLY PIPE.
2. 1/2" MPT HOT WATER SUPPLY PIPE.
3. ELECTRIC OUTLET: THE BRANCH CIRCUIT SUPPLYING THIS SYSTEM MUST BE:
- PROVIDED WITH A MAINS DISCONNECT ALL POLE AND PROTECTED BY A "CLASS A" DEDICATED GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) ALL POLE, INSTALLED, LOCATED AND MOUNTED IN ACCORDANCE WITH LOCAL AND NATIONAL ELECTRICAL CODES. NOMINAL FAULT CURRENT MAX. 30MA. OUTSIDE OF NORTH AMERICA, A GFCI MAY BE REFERRED TO AS AN EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER. THE ELCB SHOULD HAVE A MAXIMUM OPERATING TRIP CURRENT OF 30 MILLIAMPS.
- NORTH AMERICA GFCI PROTECTED 110V/60HZ, 1 PHASE, 15AMP
- INTERNATIONAL 220/50HZ, 1 PHASE 15A
4. 2" (50MM.) FLOOR DRAIN WITH A P-TRAP.

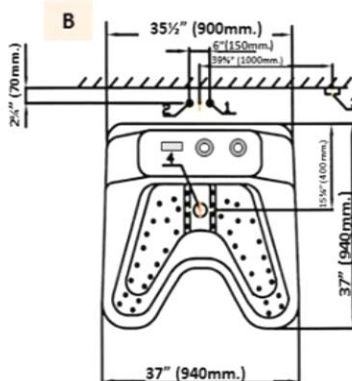

3.1

«E-15-S»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕСТНАЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВАННА ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

- **ОБЪЕМ: МИН. 57Л.**
- **ОСОБО ШИРОКАЯ ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ: ОТ ЛАДОНЕЙ ДО ПРЕДПЛЕЧЬЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.**
- **ВАННА ОСНАЩЕНА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ВИДОВ ГИДРОМАССАЖА:**
 - **1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ СТРУЙНЫЙ МАССАЖ.**
 - **2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ СТРУЙНЫЙ МАССАЖ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ ВОДЫ ВОЗДУХОМ (ВЕНТУРНЫЙ МАССАЖ.)**



СПЕЦИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

-ACTS РАЗМЕР ПРИБОРА: 94CM X 97CM X 114CM.
 -CRTS РАЗМЕР ПРИБОРА В УПАКОВКЕ: 104CM.X104CM.X132CM.
 -ОБЪЕМ:57ЛИТРОВ;
 -F/S/M ВАННА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, МОРСКОЙ ВОДОЙ/ТАЛАССОТЕРАПИИ.
 -В1D КОРПУС ВАННЫ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ И ДР. МАТЕРИАЛАМИ.
 -АНАТОМИЧНАЯ ФОРМА, ЭРГНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ;
 -ОБЪЕМ:57ЛИТРОВ;
 -ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ;
 -P1HP220/50 ПОМПА/ВОДА:1Л.С.220В/50ГЦ.,
 -ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ АНАТОМИЧНО ЛАТЕРАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОДВОДНЫХ ДЖЕТОВ ДЛЯ МОЩНОГО ПОДВОДНОГО СТРУЙНОГО МАССАЖА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ: ВОДА/ВЕНТУРИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДОБАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА- 6ШТ.
 -VS02 - СИСТЕМА ВЕНТУРИ. НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ ДЖЕТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА ВЕНТУРИ МАССАЖ/МАССАЖ СТРУЯМИ ВОДЫ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ, РЕГУЛИРУЕМЫМ НАСЫЩЕНИЕМ ВОДЫ ВОЗДУХОМ. СОЗДАЁТ РАЗЛИЧНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ ГИДРОТЕРАПИИ-2 ЗОНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
 -ХРОМИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ;
 -СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛИВА ВАННЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ;
 -ALF4 РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ВИБРОПОДАВЛЯЮЩЕЙ БАЗОЙ С АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ РЕЗИНОВОЙ БАЗОЙ.
 -ХРОМИРОВАННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ВАННЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. «E-15-S»

ВНИМАНИЕ! ЗАПРАШИВАЙТЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ДОП. ФУНКЦИЯХ ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС МОДЕЛЕЙ ВАНН В МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


№	ИНДЕКС	СПЕЦИФИКАЦИЯ. СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В ПРАЙС-ЛИСТЕ.
1	R-AWTC	R-120 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ ВАННЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ.
2	RHSH	УТОПЛЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ С ЗАПОРНЫМ КРАНОМ/СМЕШАННАЯ ВОДА.
3	CD-OZ	ОЗОНОГЕНЕРАТОР И ОЗОНОВЫЙ ДЖЕТ,ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ГИДРОМАССАЖНУЮ СИСТЕМУ ВАННЫ. СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ И САНИРОВАНИЯ ВОДЫ И ВСЕХ СИСТЕМ ВАННЫ.

3.2

«E-15-AIR»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕСТНАЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВАННА ДЛЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

- ОСОБО ШИРОКАЯ ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ: ОТ ЛАДОНЕЙ ДО ПРЕДПЛЕЧЬЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
- ОБЪЕМ: МИН. 57Л.
- ВАННА ОСНАЩЕНА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ВИДОВ ГИДРОМАССАЖА:
- 1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ (ЖЕМЧУЖНЫЙ) МАССАЖ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ ПОСТУПАЮЩЕГО В ВОДУ ВОЗДУХА.
- 2. АРОМАТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОДУ АРОМА-КАРТРИДЖЕЙ.

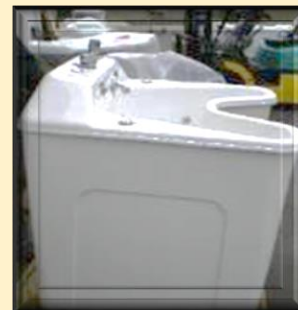

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

-ACTS РАЗМЕР ПРИБОРА: 94CM X 97CM X 114CM.
 -CRTS РАЗМЕР ПРИБОРА В УПАКОВКЕ: 104CM X 104CM X 132CM.
 -ОБЪЕМ: 57ЛИТРОВ;
 -F/S/M ВАННА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, МОРСКОЙ ВОДОЙ/ТАЛАССОТЕРАПИИ.
 -В1D КОРПУС ВАННЫ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ (ФОРМОВАННЫХ) КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЕХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ И ДР. МАТЕРИАЛАМИ.
 -АНАТОМИЧНАЯ ФОРМА, ЭРГНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ;
 -BLRC-15 ВОЗДУШНАЯ ПОМПА: 1Л.С.220В/50ГЦ.
 -BLRC-15 ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, 16 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.
 -AIR10B01W СИСТЕМА ПОДВОДНОГО "ЖЕМЧУЖНОГО"/ВОЗДУШНОГО МАССАЖА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА. СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЛАТУННЫХ КОМПОНЕНТОВ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ НАРУЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
 -АН ПРЕПЛЕЧЬЕ, РУКИ И ЛАДОНИ-10ШТ./50ШТ. ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ
 -AR-RMS14 СИСТЕМА АРОМАТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОДУ КАРТРИДЖЕЙ/4ШТ. В КОМПЛЕКТЕ.
 -CARTR4 НАБОР КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ (1 КОМПЛ.4ШТ).
 -ХРОМИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ;
 -СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛИВА ВАННЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ;
 -ALF4 РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ВИБРОПОДАВЛЯЮЩЕЙ БАЗОЙ С АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ РЕЗИНОВОЙ БАЗОЙ.
 -ХРОМИРОВАННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ВАННЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. "E-15-S AIR"

ВНИМАНИЕ! ЗАПРАШИВАЙТЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ДОП. ФУНКЦИЯХ ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС МОДЕЛЕЙ ВАНН В МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

№	ИНДЕКС	СПЕЦИФИКАЦИЯ. СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В ПРАЙС-ЛИСТЕ.
1	R-AWTC	R-120 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ ВАННЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ.
2	RHSH	УТОПЛЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ С ЗАПОРНЫМ КРАНОМ/СМЕШАННАЯ ВОДА.
3	CARTR4	НАБОР КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ (1 КОМПЛ.4ШТ).

3.3

«P-15 S»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВАННА ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

- ОСОБО ШИРОКАЯ ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ: ОТ СТОП ДО КОЛЕН ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
 - ОБЪЕМ: МИН. 57Л.
 - ВАННА ОСНАЩЕНА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ВИДОВ ГИДРОМАССАЖА:
- 1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ СТРУЙНЫЙ МАССАЖ.
 - 2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ СТРУЙНЫЙ МАССАЖ С ДОЗИРОВАННЫМ НАСЫЩЕНИЕМ ВОДЫ ВОЗДУХОМ (ВЕНТУРНЫЙ МАССАЖ.)



СПЕЦИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

-ACTS РАЗМЕР ПРИБОРА: 86CM X 86CM X 76CM.
 -CRTS РАЗМЕР ПРИБОРА В УПАКОВКЕ: 102CM X 97CM X 89CM.
 -ОБЪЕМ: 57 ЛИТРОВ;
 -F/S/M ВАННА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, МОРСКОЙ ВОДОЙ/ТАЛАССОТЕРАПИИ.
 -В1D КОРПУС ВАННЫ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ И ДР. МАТЕРИАЛАМИ.
 -АНАТОМИЧНАЯ ФОРМА, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ;
 -ОБЪЕМ: 57 ЛИТРОВ;
 -ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ;
 -P1HP220/50 ПОМПА/ВОДА: 1Л.С. 220В/50ГЦ.,
 -ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ АНАТОМИЧНО ЛАТЕРАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОДВОДНЫХ ДЖЕТОВ ДЛЯ МОЩНОГО ПОДВОДНОГО СТРУЙНОГО МАССАЖА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ: ВОДА/ВЕНТУРИ С РЕГУЛИРУЕМОМ ДОБАВЛЕНИЕМ ВОЗДУХА - 6ШТ.
 -VS02-СИСТЕМА ВЕНТУРИ. НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ПОЛИНЕЙНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ ДЖЕТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА ВЕНТУРИ МАССАЖ/МАССАЖ СТРУЯМИ ВОДЫ С КОНТРОЛИРУЕМОМ, РЕГУЛИРУЕМОМ НАСЫЩЕНИЕМ ВОДЫ ВОЗДУХОМ. СОЗДАЁТ РАЗЛИЧНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ ГИДРОТЕРАПИИ-2 ЗОНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
 -ХРОМИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ;
 -СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛИВА ВАННЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ;
 -ALF4 РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ВИБРОПОДАВЛЯЮЩЕЙ БАЗОЙ С АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ РЕЗИНОВОЙ БАЗОЙ.
 -ХРОМИРОВАННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ВАННЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ВАННЕ «P-15-S»

ВНИМАНИЕ! ЗАПРАШИВАЙТЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ДОП. ФУНКЦИЯХ ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС МОДЕЛЕЙ ВАНН В МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

№	ИНДЕКС	СПЕЦИФИКАЦИЯ. СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В ПРАЙС-ЛИСТЕ.
1	R-AWTC	R-120 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ ВАННЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ.
2	RHSH	УТОПЛЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ С ЗАПОРНЫМ КРАНОМ/СМЕШАННАЯ ВОДА.
3	CD-OZ	ОЗОНОГЕНАТОР И ОЗОНОВЫЙ ДЖЕТ, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В ГИДРОМАССАЖНУЮ СИСТЕМУ ВАННЫ. СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ И САНИРОВАНИЯ ВОДЫ И ВСЕХ СИСТЕМ ВАННЫ.

3.4

«P-15 AIR»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВАННА ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.

- ОСОБО ШИРОКАЯ ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ:
- ОТ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ДО ЛАДОНЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
- ОБЪЕМ: МИН. 57Л.
- ВАННА ОСНАЩЕНА ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
- ФОРМ И ВИДОВ ГИДРОМАССАЖА:
- 1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ/ЖЕМЧУЖНЫЙ МАССАЖ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ ПОСТУПАЮЩЕГО В ВОДУ ВОЗДУХА.
- 2. АРОМАТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОДУ АРОМА КАРТРИДЖЕЙ.



СПЕЦИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.

- ACTS РАЗМЕР ПРИБОРА: 94CM X 97CM X 114CM.
- CRTS РАЗМЕР ПРИБОРА В УПАКОВКЕ: 104CM X 104CM X 132CM.
- ОБЪЕМ: 57 ЛИТРОВ;
- F/S/M ВАННА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРЕСНОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, МОРСКОЙ ВОДОЙ (ТАЛАССОТЕРАПИИ.)
- В1D КОРПУС ВАННЫ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ (ФОРМОВАННЫХ) КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ И ДР. МАТЕРИАЛАМИ.
- АНАТОМИЧНАЯ ФОРМА, ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ;
- BLRC-15 ВОЗДУШНАЯ ПОМПА: 1Л.С. 220В/50ГЦ.
- BLRC-15 ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, 16 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.
- AIR10BR01W СИСТЕМА ПОДВОДНОГО "ЖЕМЧУЖНОГО"/ВОЗДУШНОГО МАССАЖА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА. СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА ВЫПОЛНЕНА ИЗ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЛАТУННЫХ КОМПОНЕНТОВ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ НАРУЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
- АН ПРЕПЛЕЧЬЕ, РУКИ И ЛАДОНИ - 10 ШТ./50 ШТ. ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ
- AR-RMS14 СИСТЕМА АРОМАТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОДУ КАРТРИДЖЕЙ (4 ШТ.) В КОМПЛЕКТЕ.
- CARTR4 НАБОР КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ (1 КОМПЛ. 4 ШТ.).
- ХРОМИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ;
- СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛИВА ВАННЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ;
- ALF4 РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ВИБРОПОДАВЛЯЮЩЕЙ БАЗОЙ С АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ РЕЗИНОВОЙ БАЗОЙ.
- ХРОМИРОВАННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ВАННЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ВАННЕ «P-15-S AIR»

ВНИМАНИЕ! ЗАПРАШИВАЙТЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ДОП. ФУНКЦИЯХ ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС МОДЕЛЕЙ ВАНН В МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

№	ИНДЕКС	СПЕЦИФИКАЦИЯ. СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В ПРАЙС-ЛИСТЕ.
1	R-AWTC	R-120 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПРИ НАПОЛНЕНИИ ВАННЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ.
2	RHSH	УТОПЛЕННЫЙ РУЧНОЙ ДУШ С ЗАПОРНЫМ КРАНОМ/СМЕШАННАЯ ВОДА.
3	CARTR4	НАБОР КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ (1 КОМПЛ. 4 ШТ.).

4.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ, БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ВАНН ДЛЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ «Е-15», «Р-15» И ВАННЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ ОРГАНОВ ТАЗА Р22 .

