

КАТАЛОГ.


СТАЦИОНАРНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СПА СТОЛЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ И СЛИВОМ ВОДЫ. ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЁРТЫВАНИЙ, ПИЛИНГОВ, МЫЛЬНОГО И СУХОГО МАССАЖА, ЭКСФОЛИАЦИЙ, ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНЯХ И ДУШЕВЫХ ЗАЛАХ.

RMS®

EXTRA-LUXURY WET TABLES FOR ALL TYPES OF TREATMENTS.


MADE IN
AMERICA



WET TABLE "A" AFTER PRODUCTION, BEFORE CRATING, INSTALLED ON-SITE PHOTOS.

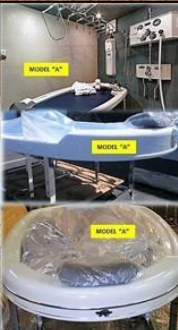
PARTLY ASSEMBLED, CARDBOARD BOX ON A PALLET DIMS: 86"X48"X17"
2180MM X 1220MM X 440MM. WEIGHT: 80LBS. (37KGS)


RMS®

MADE IN
AMERICAFULLY ASSEMBLED, CRATED
DIMS:
86" X 48" X 35"
2180MM. X 1220MM. X 890MM.
WEIGHT: 160LBS. (73KGS.)

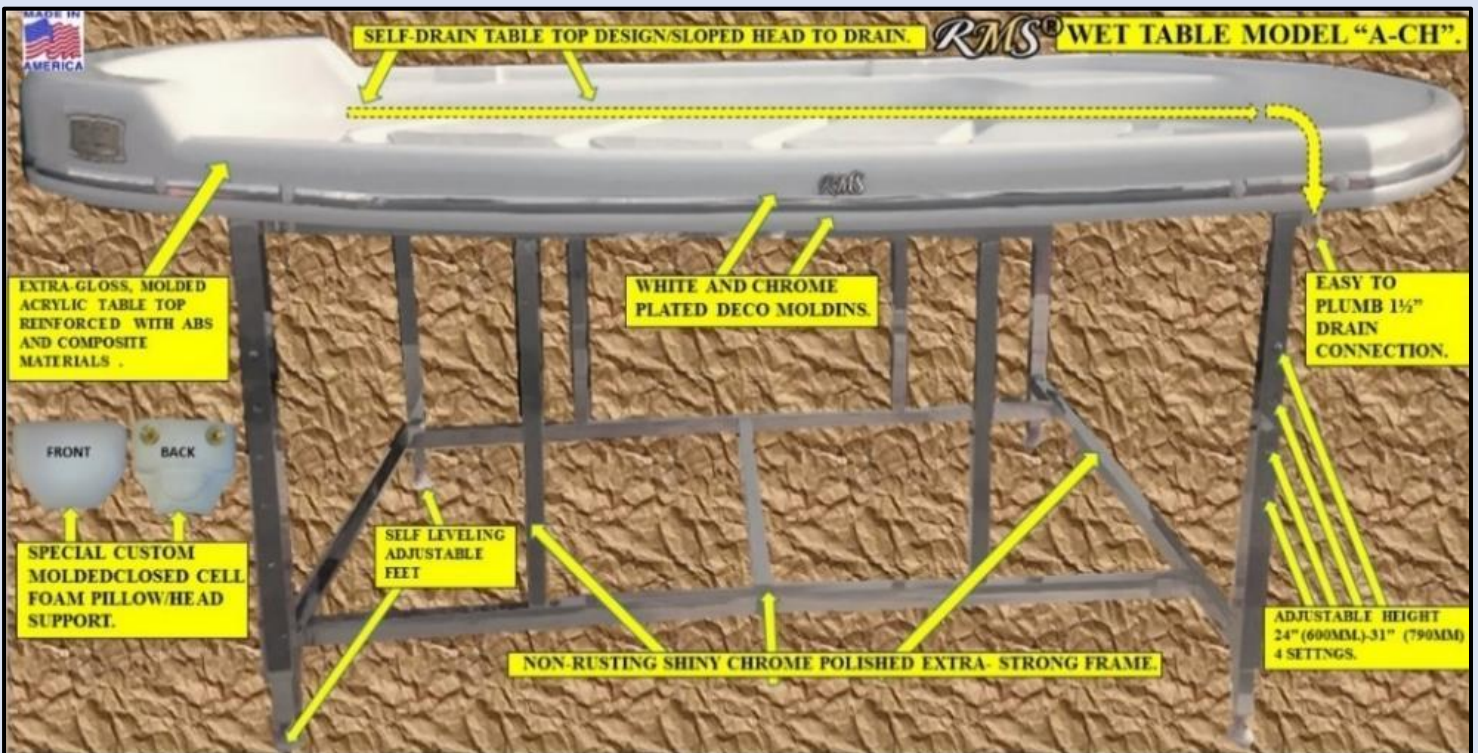

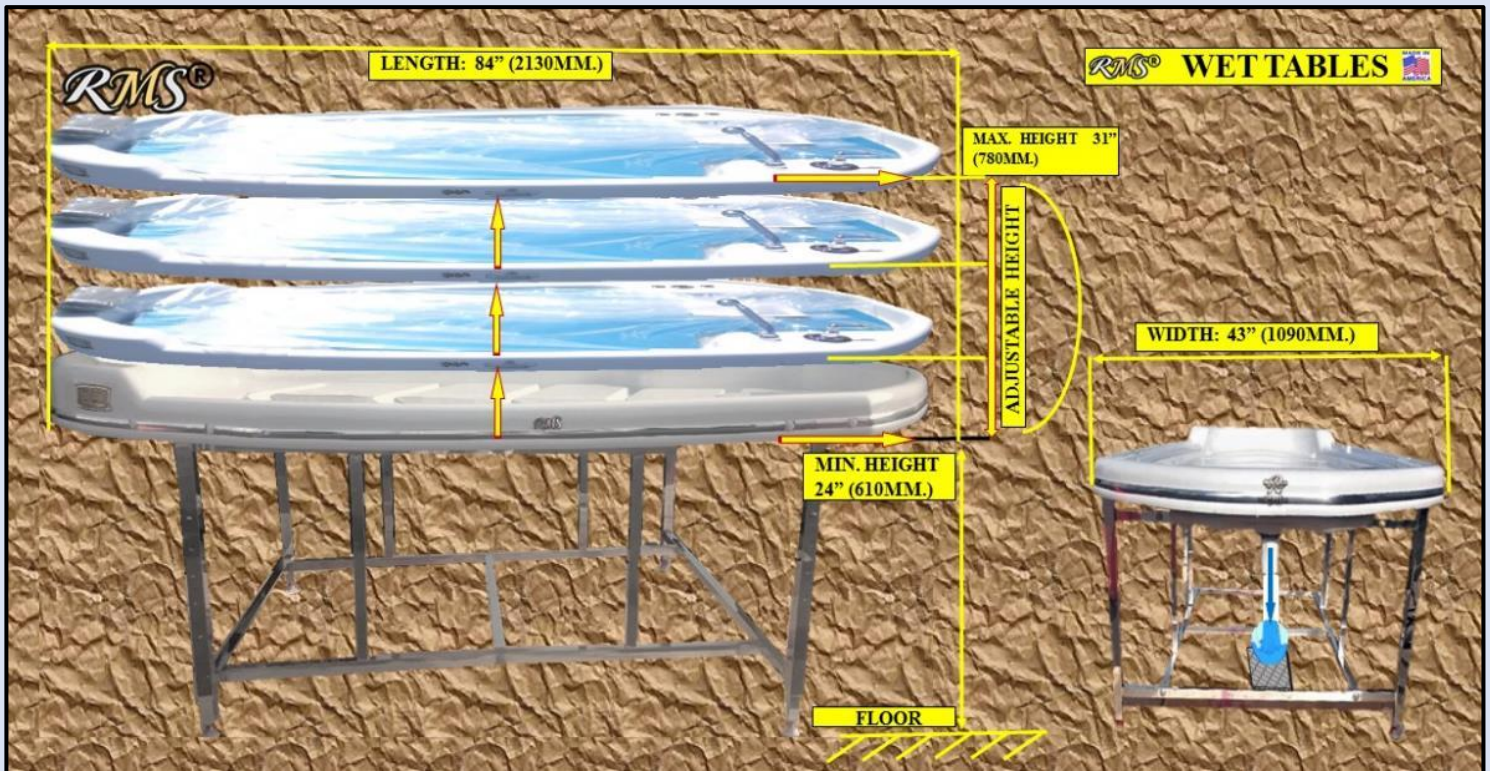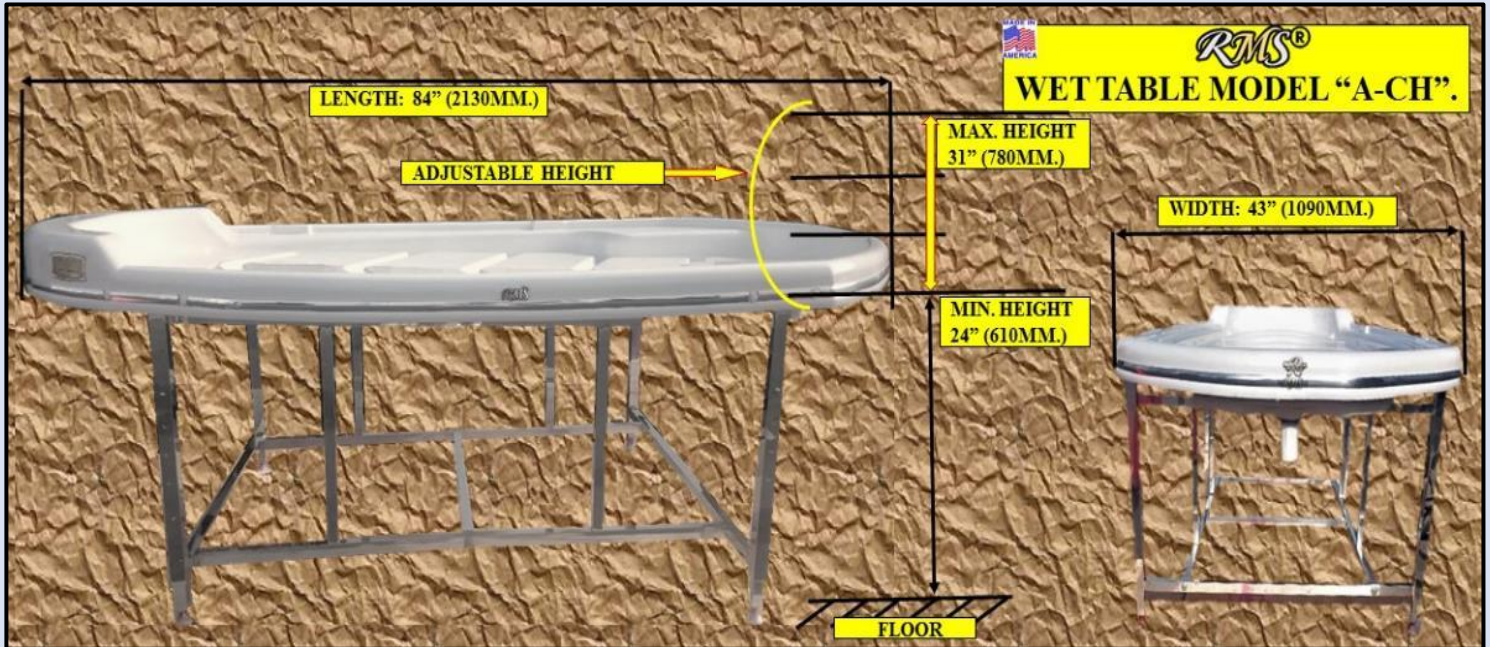


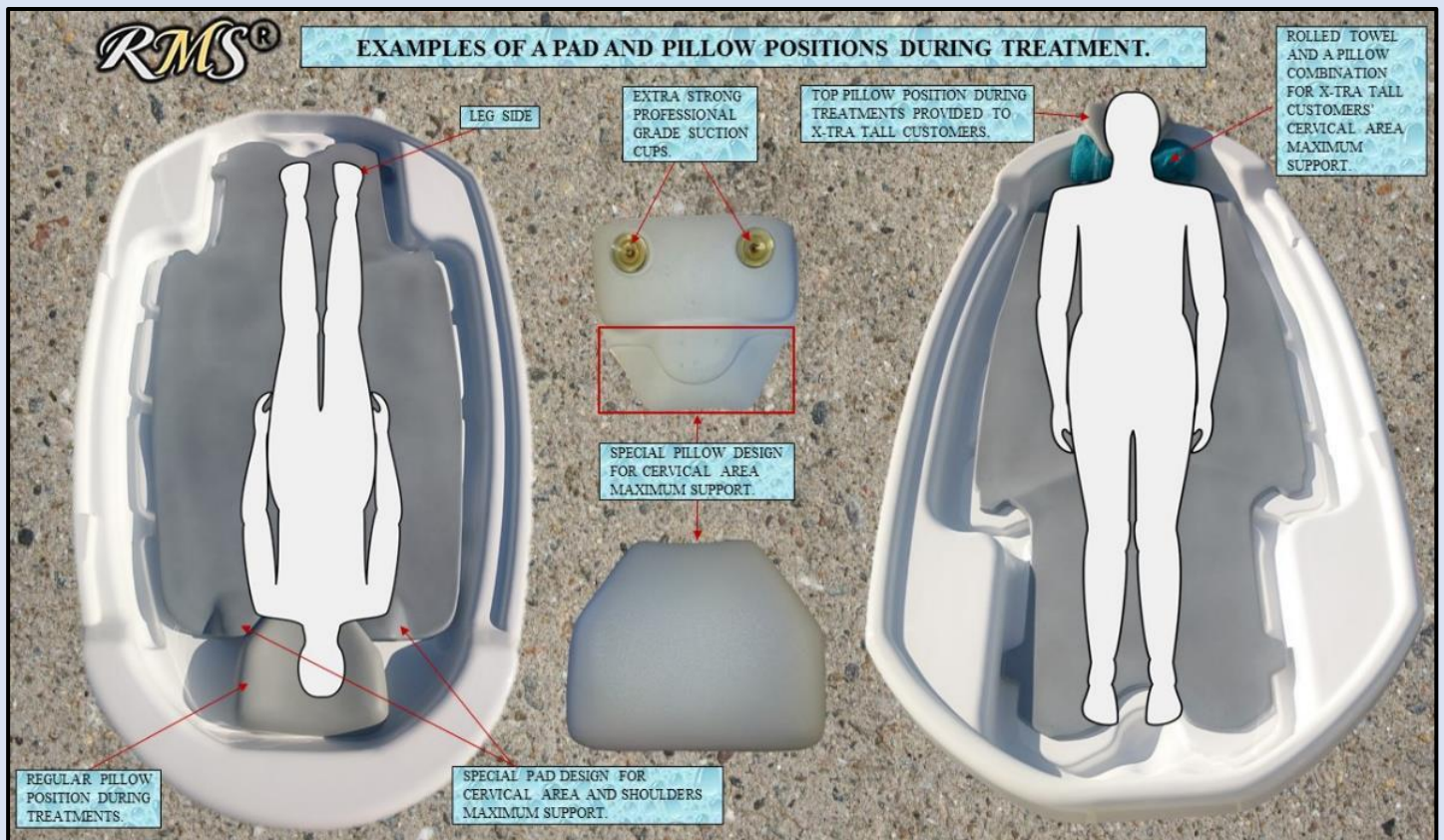


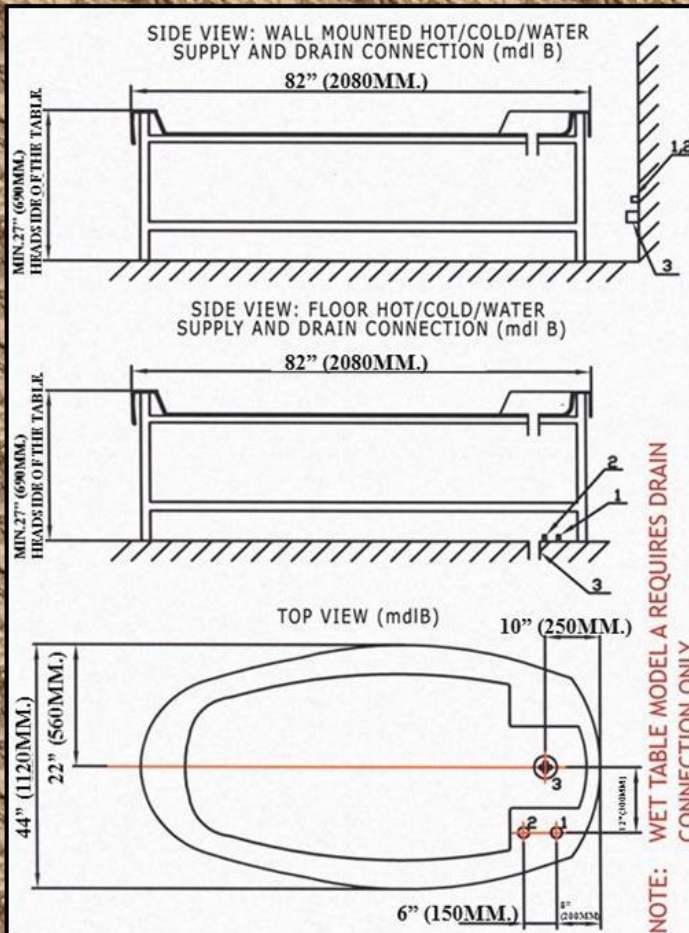

NOTE: RMS Hydrotherapy products designed to be used with normal water supply pipe pressure 45-55PSI / 3 - 3.5Atm.






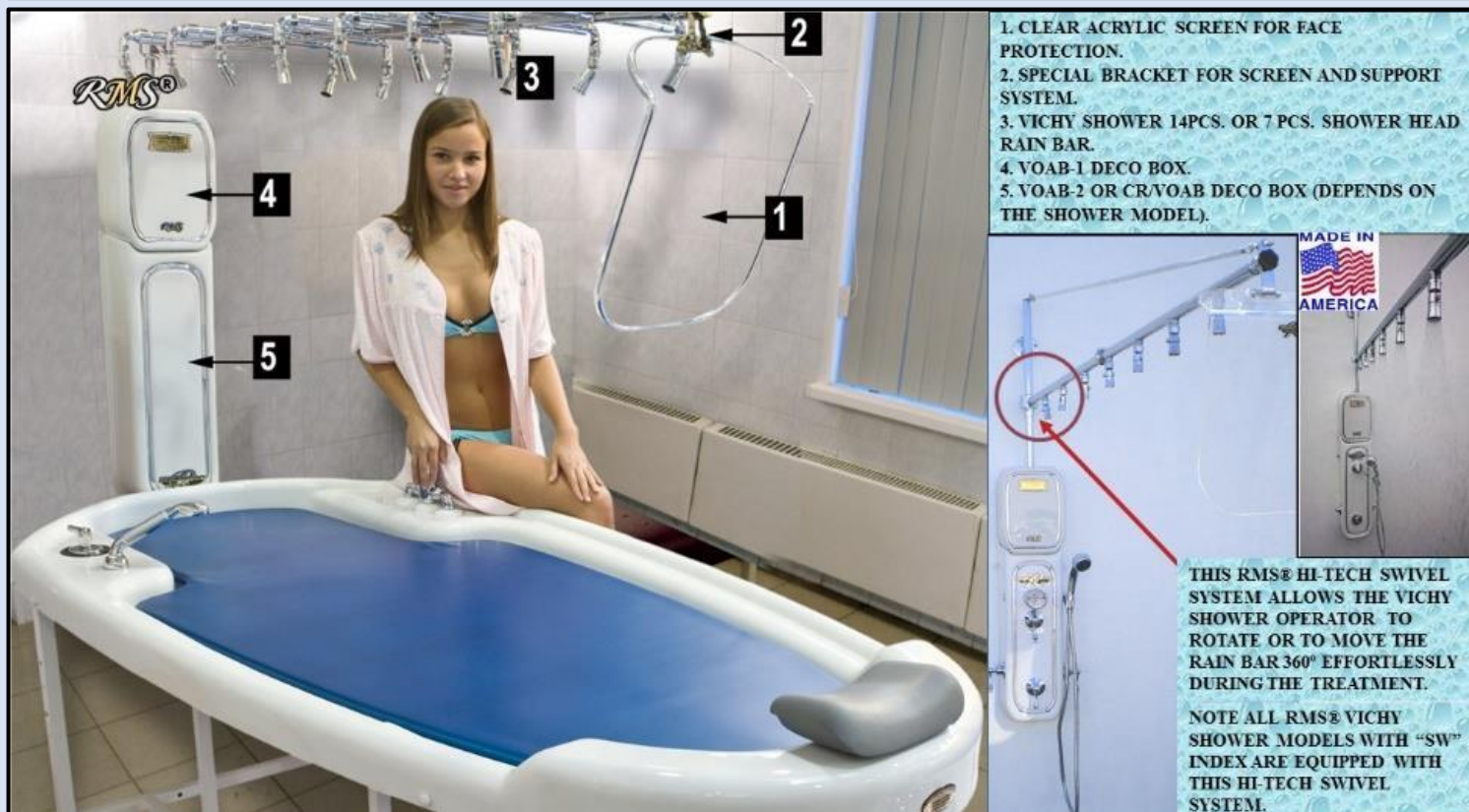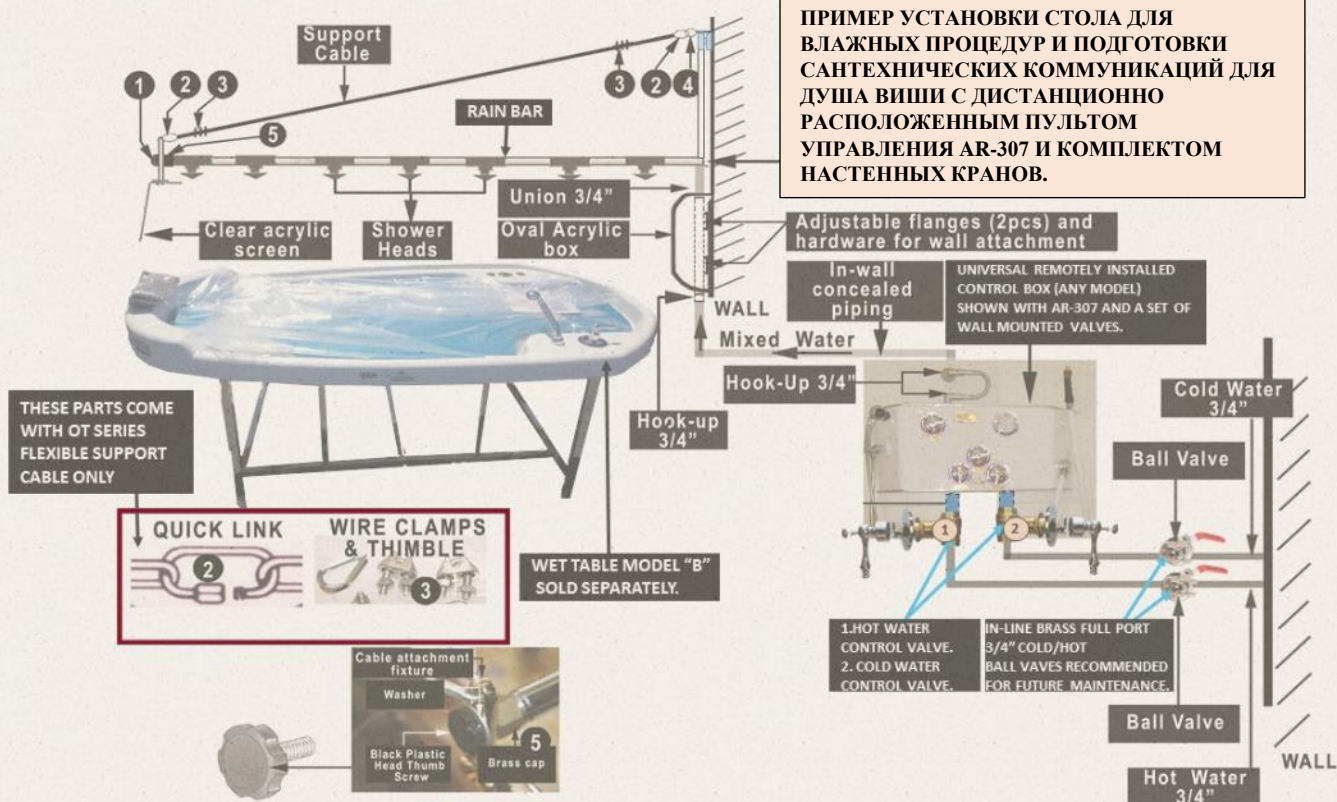

EXAMPLE OF THE WET TABLE AND AFFUSION/VICHY SHOWER INSTALLATION. THE SWIVEL (SW)VICHY SHOWER RAIN BAR TURNS 360°. WITH THE RAIN BAR TURNED TO THE WALL, OPERATOR CAN WALK AROUND THE WET TABLE TO ACCESS THE CUSTOMER ON ALL SIDES.

TOP VIEW

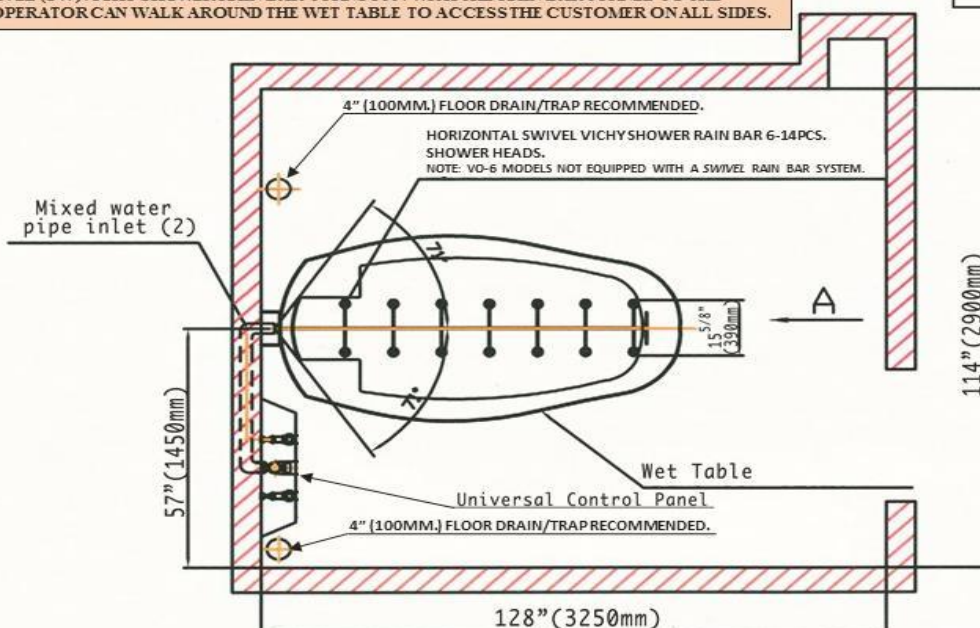


IMPORTANT NOTE 1: Normal flow rate of 3-3.5Atm (45-52Psi) is required for optimal system operation.
IMPORTANT NOTE 2: Minimum 1/4" per 1 foot mortar bed or finished /tiled floor slope to drain required.

- * All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
- * All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

Relax Medical Systems Inc			
EXAMPLE OF A WET TABLE AND AFFUSION VICHY SHOWER INSTALLATION. SHOWN WITH REMOTELY INSTALLED CONTROL BOX.			
10 March 88 Pteforce	A	115117	B
	n/g		1 of 4

WET TABLE "B" COLD/HOT WATER SUPPLY LINES LAYOUT.

FRONT VIEW

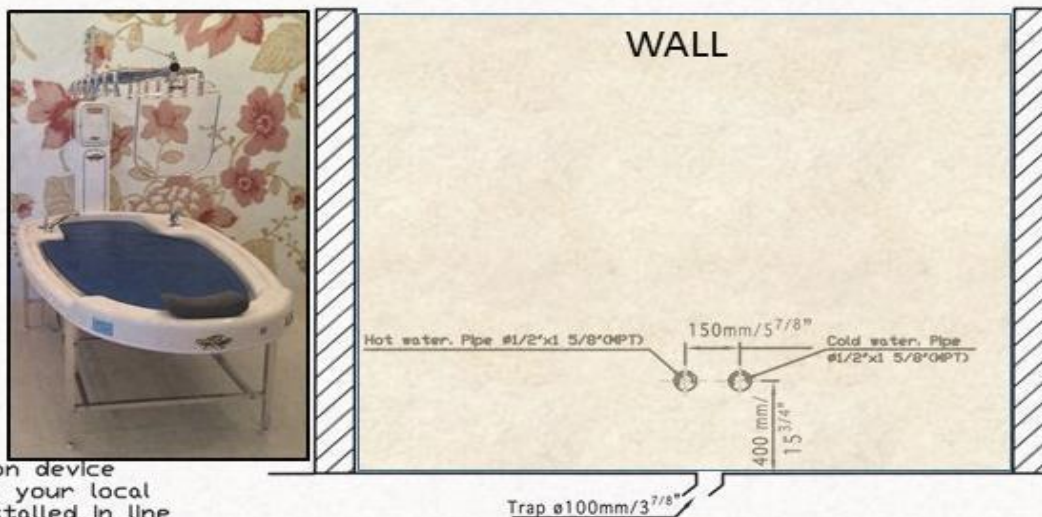

Note 1:
IMPORTANT:

A "back-flow" protection device approved and listed by your local authorities must be installed in line and in accordance with local codes

Note 2: Install hot on left and cold on right according to valve marking.

IMPORTANT: before connecting the hot and cold water to the system, first purge the supply water to ensure all grit and waste is purged from the pipes.

Note 3: Turn on hot and cold supplies, valve will not operate unless both hot and cold water are turned on.

Note 4: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.


Note 5: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should

be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.

Note 6: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS	
Wet Table model "B"	
RMS	SERVICE DEPARTMENT


PLUMBING REQUIREMENTS FOR A WET TABLE "B" INSTALLATION. TOP VIEW

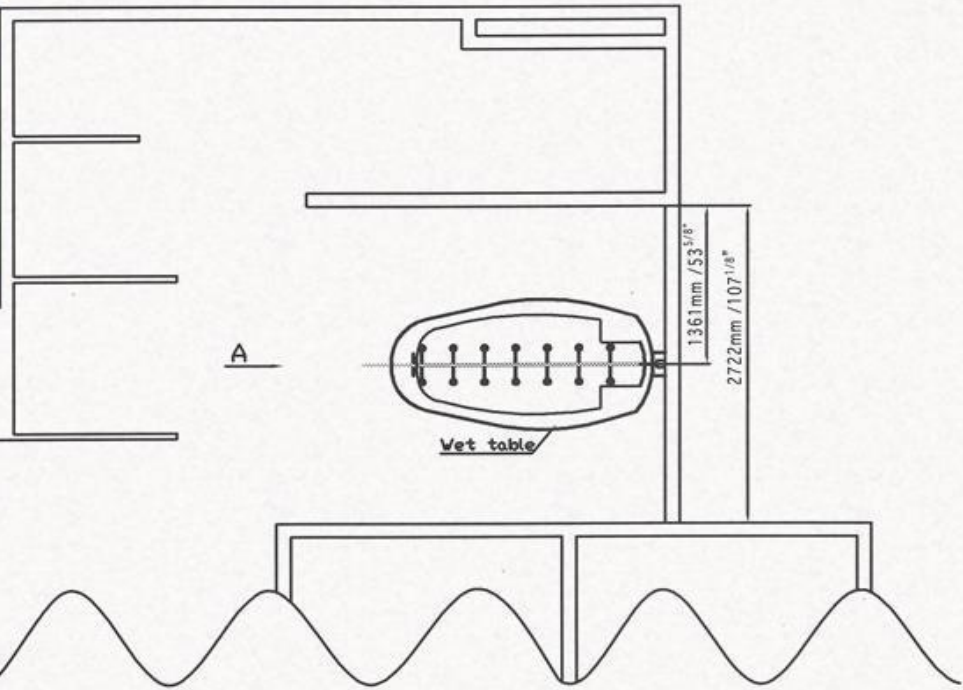


Note 1: Install hot on left and cold on right.
 IMPORTANT: Before connecting the hot and cold water to the system, first purge the supply water to ensure all grit and waste from the pipes.
 Note 2: Turn on hot and cold supplies, valve will not operate unless both hot and cold water are turned on.
 Note 3: Allow valve to run in warm position for a few minutes to totally flush system.
 Note 4: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.
 Note 5: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's discretion only.
 Note 6: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS			
Wet Table model "B"			
RMS			SERVICE DEPARTMENT


SIDE VIEW: WALL MOUNTED HOT/COLD/WATER SUPPLY AND DRAIN CONNECTION (mdl B)

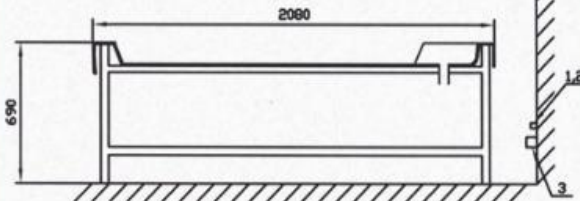

SIDE VIEW: FLOOR HOT/COLD/WATER SUPPLY AND DRAIN CONNECTION (mdl B)

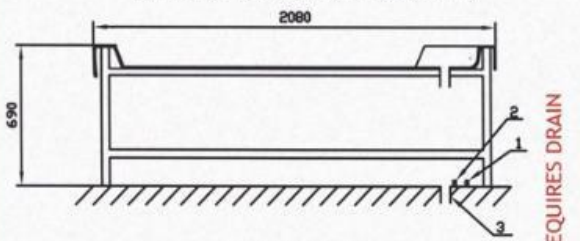

TOP VIEW (mdl B)

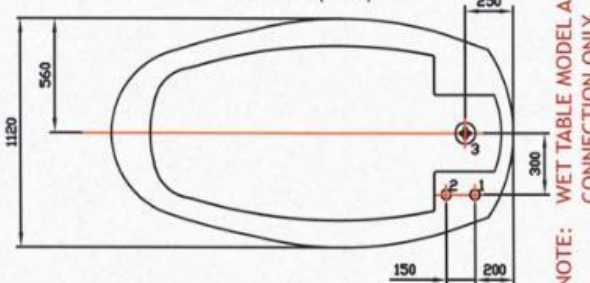

NOTE: WET TABLE MODEL A REQUIRES DRAIN CONNECTION ONLY



EXAMPLES OF FLOOR/WALL PLUMBING CONNECTIONS FOR THE WET TABLE MODEL "A", "B".

NOTE: FOR WET TABLE MODEL "A" ONLY FLOOR DRAIN PLUMBING REQUIRED.

1. COLD WATER CONNECTION: 1/2" MALE, THREADED 40MM ABOVE THE TILED FLOOR.
 2. HOT WATER CONNECTION: 1/2" MALE, THREADED 40MM ABOVE THE TILED FLOOR.
 3. MAIN DRAIN WITH ODOR TRAP: DIAM. 2"-4" (50-100MM) ADDITIONAL SIDE INLET 40MM, USED AS AN AUXILIARY ROOM DRAIN SIMULTANEOUSLY WITH THE MAIN DRAIN RECOMMENDED.
- IMPORTANT NOTE: A "BACK-FLOW" PROTECTION DEVICE APPROVED AND LISTED BY YOUR LOCAL AUTHORITIES MUST BE INSTALLED IN LINE AND IN ACCORDANCE WITH LOCAL CODES.

NOTE: RMS® HYDROTHERAPY PRODUCTS DESIGNED TO BE USED WITH NORMAL WATER SUPPLY PIPE PRESSURE 45-55PSI / 3 - 3.5ATM




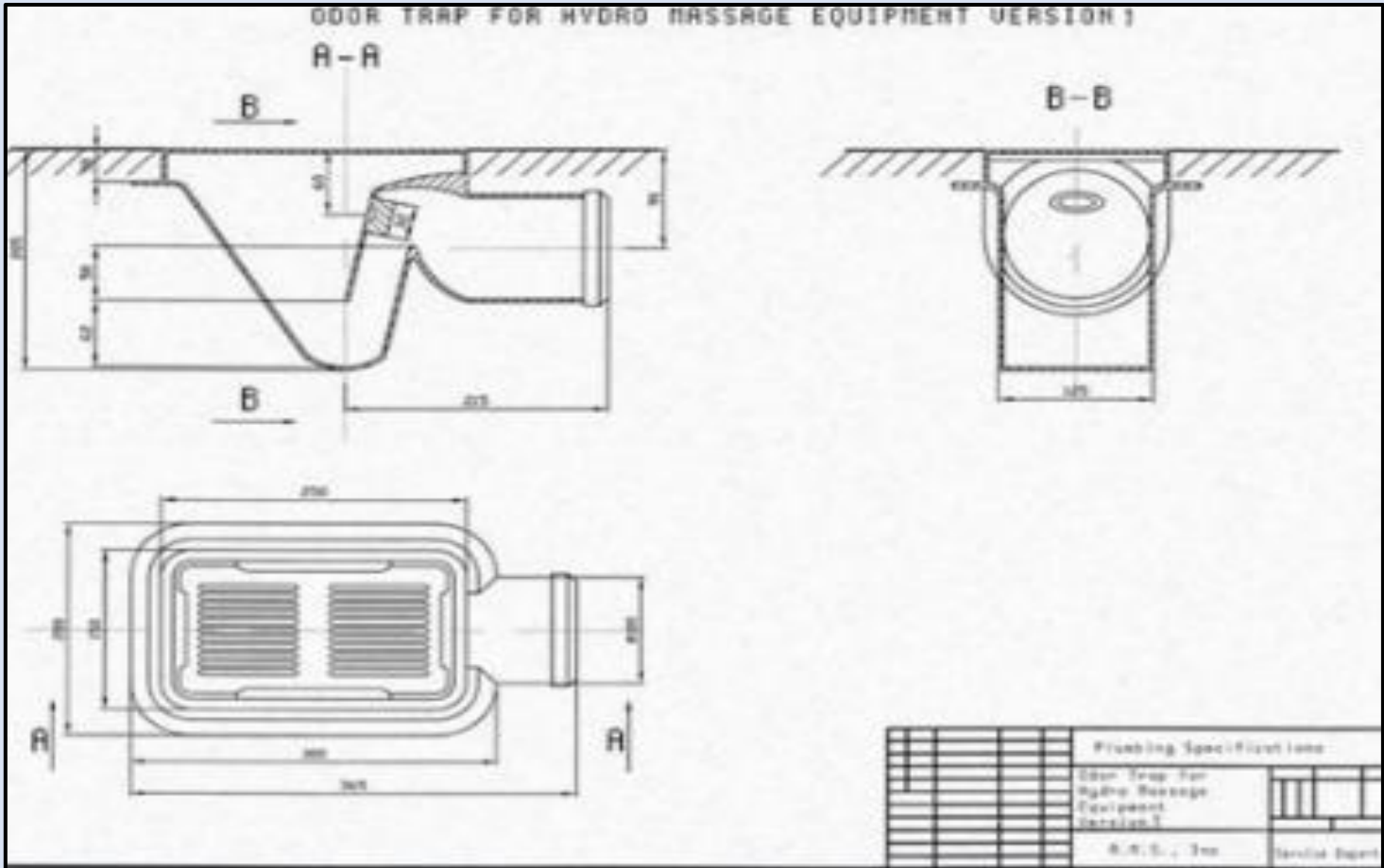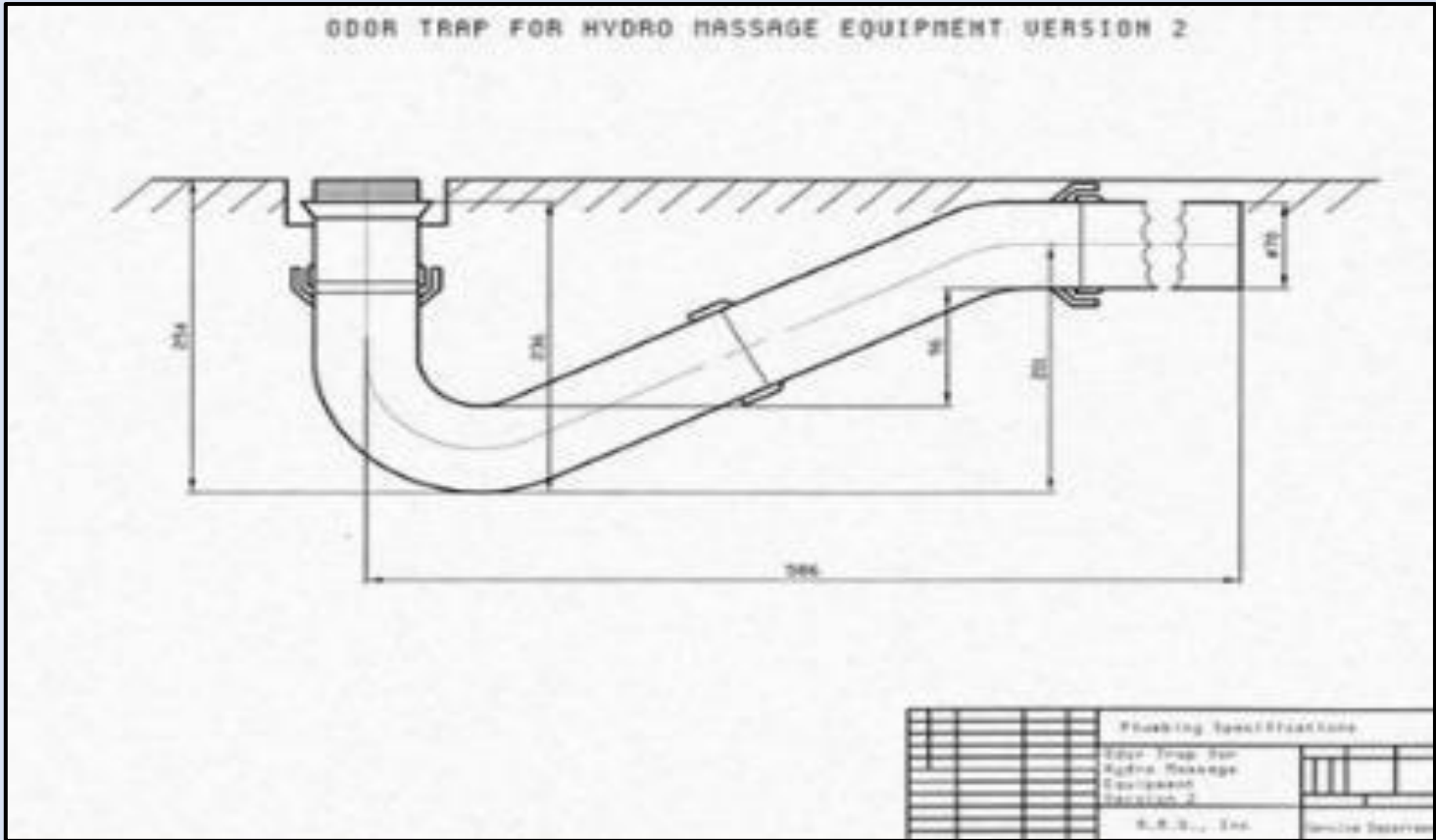

СТАЦИОНАРНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СТОЛЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ И СЛИВОМ ВОДЫ. ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЁРТЫВАНИЙ, ПИЛИНГОВ, МЫЛЬНОГО И СУХОГО МАССАЖА, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БАНЯХ И ДУШЕВЫХ ЗАЛАХ.

ИНДЕКС	МОДЕЛЬ. ОПИСАНИЕ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.
WTMA-C	<p>МОДЕЛЬ «А-СН» СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ/ХРОМ, ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.</p>
WTMA-WT	<p>МОДЕЛЬ «А-WT» СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.</p> <p>РАМА СТОЛА БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕДПОКРАСОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ И ПОКРАСКОЙ С ФИКСИРУЮЩИМ ВОДОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА. РАМА ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.</p>
WTMB-C	<p>МОДЕЛЬ «В-СН» СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. ХРОМИРОВАННАЯ РАМА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИРОВКИ/ХРОМ, ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.</p> <p>СТОЛ ТАКЖЕ ОСНАЩЁН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНЕРСКИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ R-120 ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.</p>
WTMB-WT	<p>МОДЕЛЬ «В-WT» СТАЦИОНАРНЫЙ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ. КРЫШКА СТОЛА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.</p> <p>РАМА СТОЛА БЕЛОГО ЦВЕТА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕДПОКРАСОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ И ПОКРАСКОЙ С ФИКСИРУЮЩИМ ВОДОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ ЭПОКСИДНОГО СОСТАВА. РАМА ОСНАЩЕНА МЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ, ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.</p> <p>СТОЛ ТАКЖЕ ОСНАЩЁН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИЗАЙНЕРСКИМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ R-120 ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ.</p>


ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ АКРИЛОВАЯ КРЫШКА СТОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛ НАММАМ.

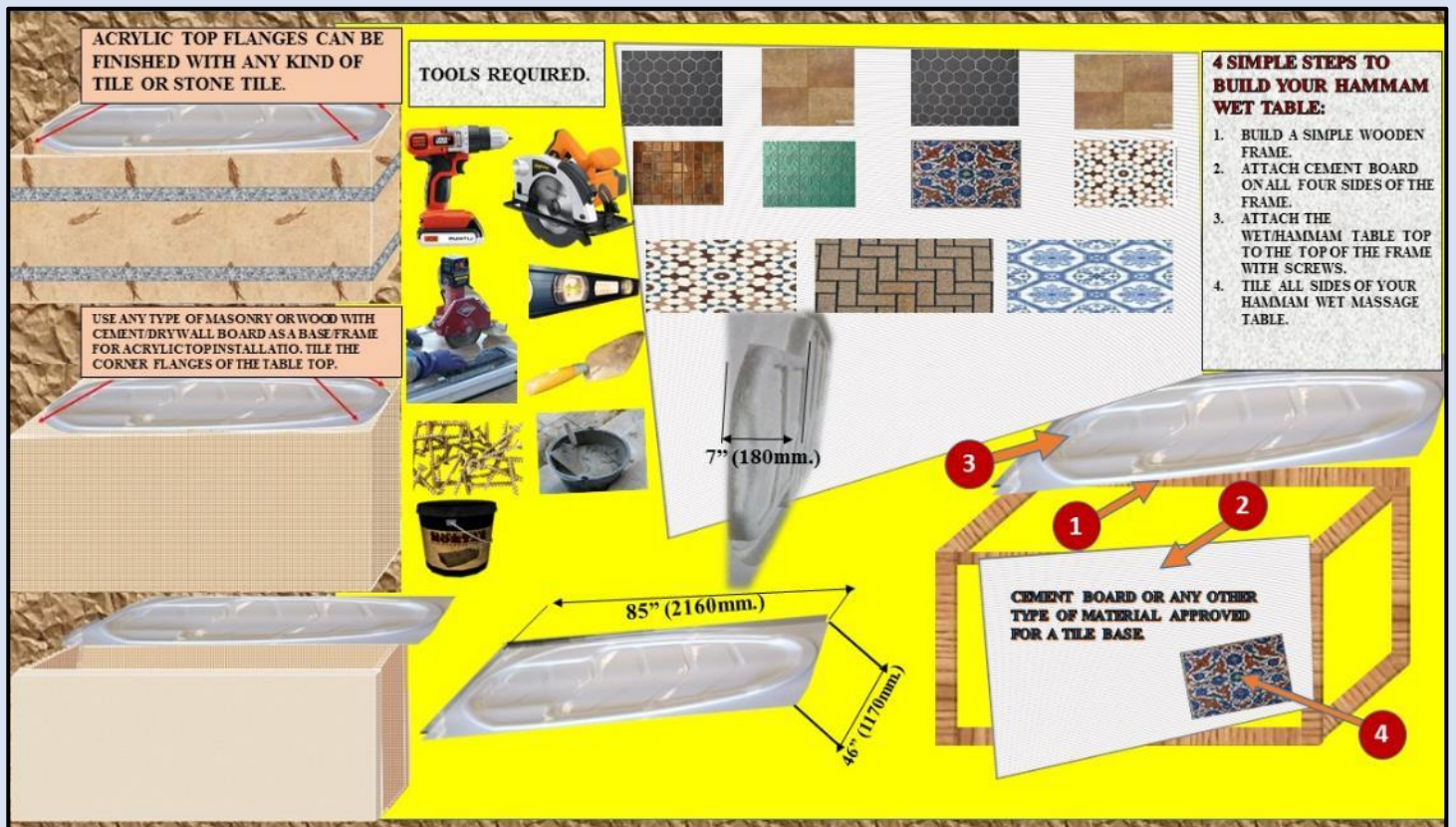


RMS® ROYAL SIZE ACRYLIC WET TABLE TOPS FOR HAMMAM EXTRA LUXURY WET TABLE DESIGN.



ACTUAL WEIGHT APP.
110LBS. (50KGS.)

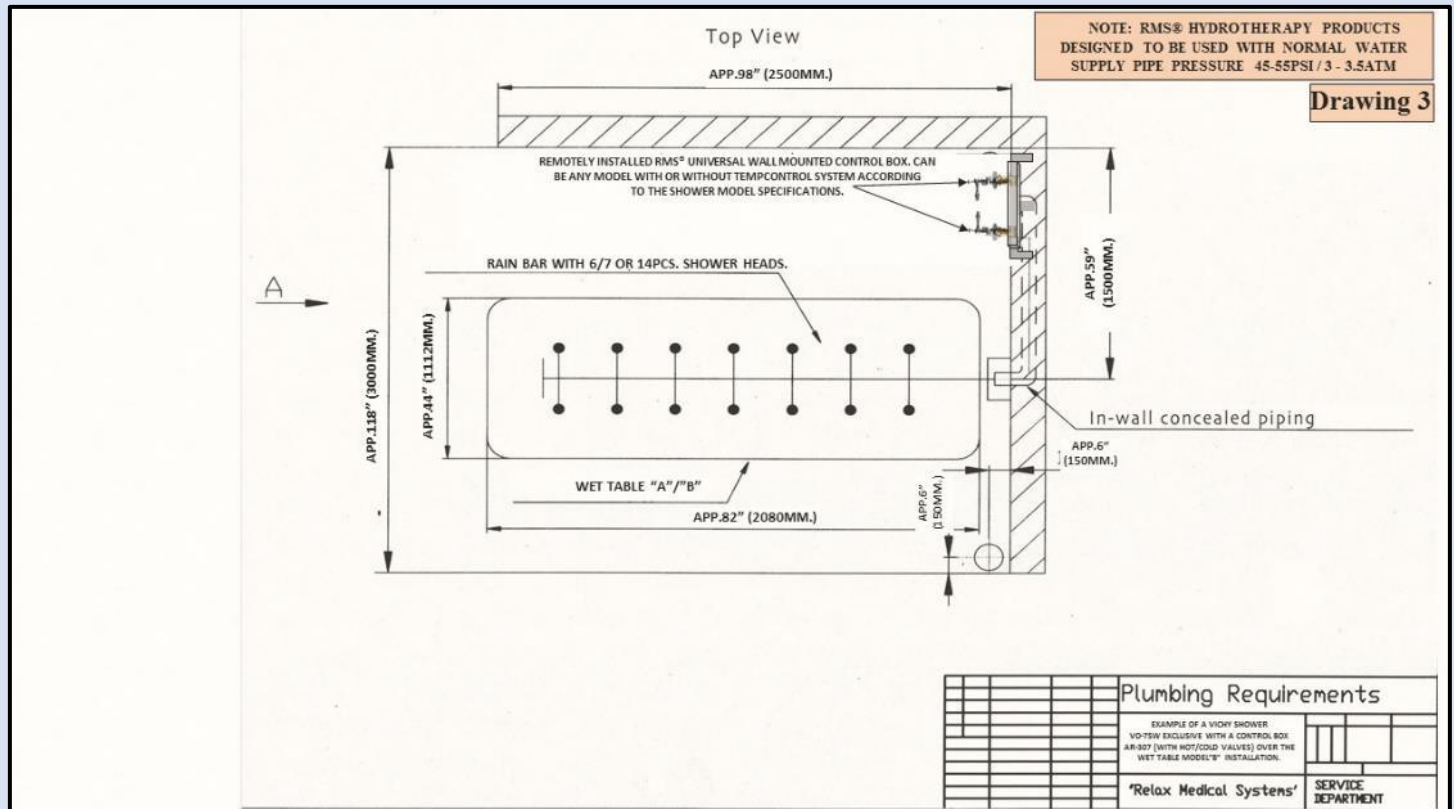

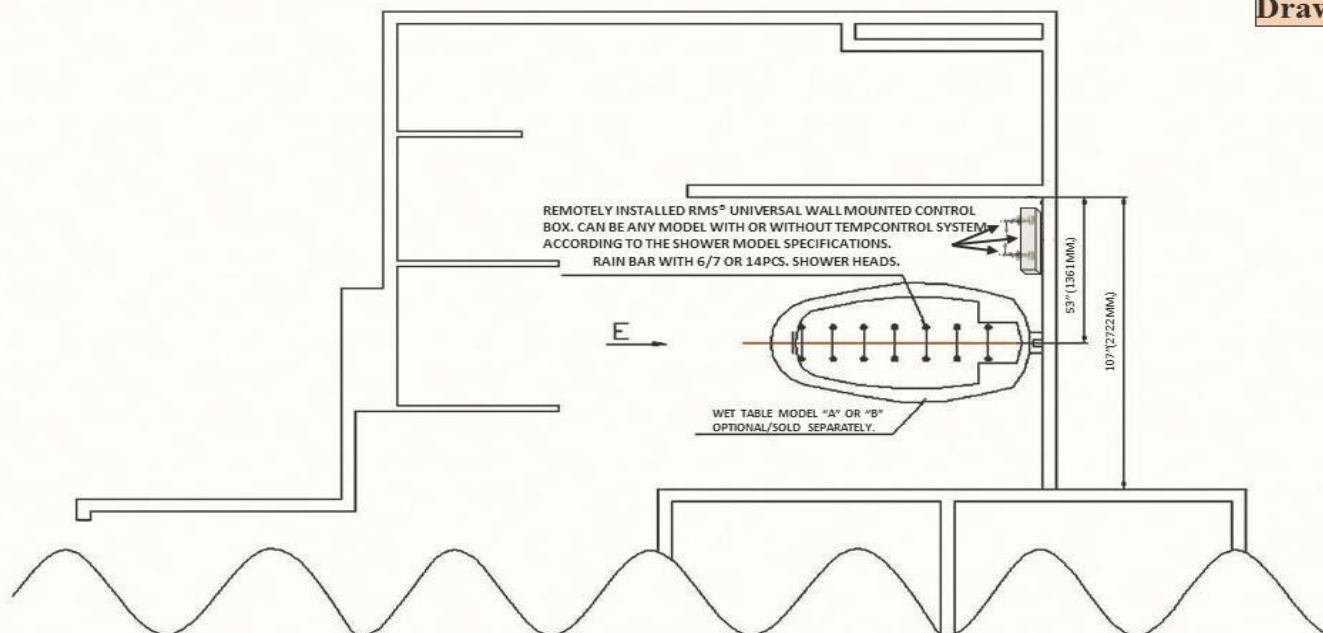NOTE: RMS® Hydrotherapy products designed to be used with normal water supply pipe pressure 45-55PSI / 3 - 3.5Atm**Drawing 1**

NOTE 1: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.

NOTE 2: Install Hot on left and COLD on right according to valve marking.

NOTE 3: Turn on hot and cold supplies, valve will not operate unless both hot and cold water are turned on.


NOTE 4: Allow valve to run in warm position for a few minutes to totally flush system.

NOTE 5: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.

NOTE 6: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's Discretion only.

NOTE 7: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS FOR RMS® VICHY SHOWERS SERIES DESIGNED TO BE USED WITH REMOTELY PLACED CONTROL BOXES.			
EXAMPLE OF VICHY VO-7 SW EXCLUSIVE AND A CONTROL BOX INSTALLATION.			
RELAX MEDICAL SYSTEMS INC. D.B.A. RMS®			
RMS® SERVICE DEPARTMENT			

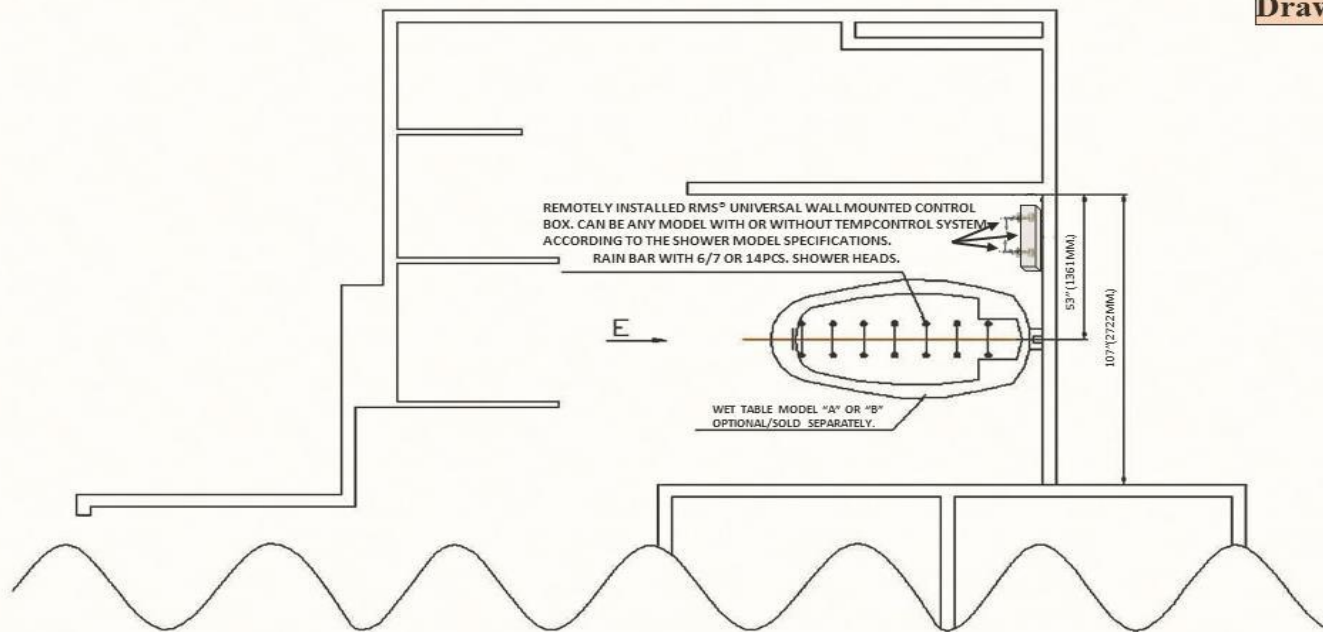NOTE: RMS® Hydrotherapy products designed to be used with normal water supply pipe pressure 45-55PSI / 3 - 3.5Atm**Drawing 1**

NOTE 1: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.

NOTE 2: Install Hot on left and COLD on right according to valve marking.

NOTE 3: Turn on hot and cold supplies, valve will not operate unless both hot and cold water are turned on.

NOTE 4: Allow valve to run in warm position for a few minutes to totally flush system.

NOTE 5: All dimensions are approximate. Concealed piping and fittings supplied and installed by owner.

NOTE 6: All drawings and layouts provided by RMS are approximate and should be used as general guidelines for owner's final architectural drawings preparation at owner's Discretion only.

NOTE 7: RMS is not responsible for errors and omissions.

PLUMBING REQUIREMENTS FOR RMS® VICHY SHOWERS SERIES DESIGNED TO BE USED WITH REMOTELY PLACED CONTROL BOXES.			
EXAMPLE OF VICHY VO-7 SW EXCLUSIVE AND A CONTROL BOX INSTALLATION.			
RELAX MEDICAL SYSTEMS INC. D.B.A. RMS®			
RMS® SERVICE DEPARTMENT			

АКРИЛОВАЯ КРЫШКА-СТОЛ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТОЛОВ НАММАМ	
ИНДЕКС	МОДЕЛЬ. ОПИСАНИЕ. СПЕЦИФИКАЦИЯ.
HWT-TA	<p>МОДЕЛЬ WT-TA-АКРИЛОВАЯ КРЫШКА-СТОЛ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ. КРЫШКА- СТОЛ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.</p> <p>КРЫШКА-СТОЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТАЦИОНАРНУЮ БАЗУ ИЗ КАМНЯ, КИРПИЧА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ, НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АКРИЛОВОЙ КРЫШКИ-СТОЛ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАТЬ ЕЁ В ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.</p> <p>ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ СТОЛОВ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ</p> <p>ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА.</p>
HWT-TB	<p>МОДЕЛЬ WT-TB-АКРИЛОВАЯ КРЫШКА-СТОЛ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ. КРЫШКА-СТОЛ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЬНОПРЕССОВАННЫХ/ФОРМОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЁХСЛОЙНОГО АКРИЛА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНЫМИ И ПРОТИВОУДАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УСИЛЕННЫМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.</p> <p>КРЫШКА-СТОЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТАЦИОНАРНУЮ БАЗУ ИЗ КАМНЯ, КИРПИЧА ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ПОСЛЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛКУ ПЛИТКОЙ, НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕКОРАТИВ-НЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АКРИЛОВОЙ КРЫШКИ-СТОЛ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАТЬ ЕЁ В ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ СТОЛОВ ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ, СОЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДУШЕЙ «ВИШИ», ВЛАЖНОГО И СУХОГО МАССАЖА И ДРУГИХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР В БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, БАССЕЙНАХ И САУНАХ</p> <p>ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ АВТОКОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕШАННОЙ ВОДЫ, РУЧНЫМ ДУШЕМ С ГИБКИМ ШЛАНГОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРАНОМ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНЫМ ДУШЕМ И ДРЕНАЖЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВОДА ПРОДУКТОВ ПРОЦЕДУРЫ В СЛИВ В ПОЛУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДРЕНАЖА, ПОДГОЛОВНИКОМ, СПЕЦИАЛЬНЫМ МАТРАСОМ.</p>

